



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

Documento Versão 0.0

Data de Emissão: XX/XX/XXXX

Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

O Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate é composto por placas e parafusos, indicado para fixação em ossos fraturados com o objetivo de proporcionar fixação. As placas possuem orifícios para introdução dos parafusos. Os orifícios das placas são auto compressivos que contribuem na compressão axial sem o uso de aparelhos compressores.

INDICAÇÃO/FINALIDADE/USO

O Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate tem como indicação a fixação em ossos fraturados por algum trauma ou esforço excessivo aplicado a osso do esqueleto humano tendo por objetivo a estabilização deste osso até a consolidação da fratura.

O sistema pode ser usado em ossos grandes dos membros superiores e inferiores, tais como úmero, fêmur, ossos do antebraço, tíbia, na pelve, metacarpo, metatarso, fíbula, distal de ulna distal, olecrano, metatarso, pélvis, acetábulo, distal de úmero, clavícula, calcâneo e para a extremidade distal do rádio.

O sistema deve ser implantado no paciente após o diagnóstico sobre o grau da fratura, tipo da fratura (fechada, exposta, completa, incompleta, simples ou múltiplas), porte físico do paciente, região anatômica e técnica cirúrgica a ser empregada.

O sistema é apresentado em diversos modelos e tamanhos para permitir ao médico-cirurgião escolher as placas e parafusos a serem usados levando em conta o grau e tipo da fratura, condições do paciente e técnica cirúrgica.

O sistema é destinado ao uso em ambiente cirúrgico. Seu manuseio e utilização devem ser realizados por pessoal treinado e capacitado para isto, incluindo médico-cirurgião.

AVISOS E PRECAUÇÕES SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO

- **PRODUTO DE USO ÚNICO.**

- **PROIBIDO REPROCESSAR.**

- **PRODUTO NÃO ESTÉRIL. ESTERILIZAR ANTES DO USO.**

- Instruções de uso devem ser lidas atentamente antes do uso dos implantes ortopédicos.

- As placas e parafusos que compõe o Sistema somente podem ser usadas em seu conjunto, ou seja, placas e parafusos de diferentes fabricantes que não a MEDIMED não podem ser usadas com qualquer componente deste sistema.

- O médico-cirurgião assim como todos os usuários dos implantes ortopédicos em todas as fases do ciclo de vida do produto devem ser treinados e capacitados para o seu transporte, armazenamento, manuseio e implantação.

- Não utilize os produtos que estejam com a embalagem violada.

- O Sistema são fornecidos na condição não estéril e devem ser esterilizados antes do uso conforme as orientações de esterilização fornecidos pela MEDIMED.



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

- O Sistema NÃO é indicado para neonatais.
- O Sistema é tão somente indicado para uso em fraturas por trauma, NÃO sendo indicado para tratar correções ortopédicas, deformidades congênicas ou quaisquer deficiências nos membros superiores ou inferiores.
- O Sistema NÃO deve ser usado com cimento ortopédico.
- O estudo pré-operatório de imagens para reduzir os riscos cirúrgicos relacionados à técnica deve ser realizado pelo médico-cirurgião.
- O médico-cirurgião deve orientar ao paciente sobre os procedimentos pós-operatórios a serem seguidos por este paciente.
- Em caso de infecção o correto tratamento de antibioticoterapia deve ser imediatamente iniciado.
- Não consolidação da fratura ou retardo na fusão óssea, que podem resultar na falha, soltura e quebra dos produtos pode ser causado por má qualidade óssea ou osteoporose ou sarcoma osteogênico.
- Podem ocorrer deformação, fratura, soltura, deslocamento ou falha precoce ou tardia dos produtos. Nestes casos o paciente deve ser orientado a comunicar o fato ao médico visando as ações a serem tomadas.
- Embora os implantes ortopédicos fabricados em titânio e em liga de titânio não causem qualquer interferência em exame de ressonância magnética deve ser considerado a possibilidade de distorção dos resultados do exame.
- O paciente deve ser informado sobre a necessidade de informar ser portador de implante metálico quando for submetido a exames por imagens.
- O paciente deve ser informado e entender que em todos os procedimentos cirúrgicos há a possibilidade de ocorrências de complicações, enfermidades e morte.
- O paciente deve ser alertado que o não atendimento às instruções do período pós-operatório pode levar à quebra, deformação ou soltura dos implantes ortopédicos.
- O médico-cirurgião deve orientar o paciente sobre as suas limitações com relação ao desenvolvimento do trabalho ou atividade deste paciente que implique em esforços físicos ou força sobre a região onde o produto médico foi implantado.
- Há possibilidade de quebra, soltura, deformação ou falha do implante devido à fadiga do metal se a consolidação da fratura ou fusão óssea dos seguimentos artrodesados não ocorre no tempo esperado.
- O médico-cirurgião deve avaliar cuidadosamente os riscos e os benefícios da explantação do produto médico após a consolidação da fratura.
- Paciente obeso ou com sobrepeso, ou ainda que não respeite as recomendações de redução das atividades, preservação de membro e instruções pós-operatória, pode causar sobrecarga nos implantes devido à excessiva carga mecânica e número de ciclos aplicados.
- Pacientes fumantes, dependentes químicos ou em condição de desnutrição devem ser alertados sobre o aumento da incidência de não união óssea e de pseudartroses.
- Não deve ser aplicado torque excessivo ao implante ortopédico durante o procedimento cirúrgico.

CONTRAINDICAÇÕES

O uso do sistema é contraindicado nos seguintes casos:

- Gravidez, a menos que uma fixação interna seja indicada para tratamento de uma fratura instável;
- Pacientes que tenham capacidade cognitiva suficiente para entender as orientações para o pré e/ou pós-operatório;



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

- Doenças mentais profundas ou pacientes não obedeçam às instruções pós-operatórias;
- Quaisquer condições médicas ou cirúrgicas que comprometam o processo de uma cirurgia de implante (p.ex., presença de tumores malignos, metástase ou presença de anomalias congênitas graves);
- Osteoporose ou qualquer outra má qualidade óssea;
- Mal de Parkinson;
- Doença de Charcot;
- Doença de Paget;
- Todos os pacientes que tenham uma cobertura tissular pobre na zona operada;
- Febre;
- Inflamação local;
- Baixo nível de musculatura, comprometimento neuromuscular ou deficiência vascular do membro no qual será implantado o produto;
- Processos infecciosos;
- Neonatais ou pessoas com osso em fase de formação;
- Paciente com sobrepeso ou obesidade mórbida;
- Pessoa dependente químico;
- Condição médica ou clínica que poderia comprometer os resultados esperados do uso do produto médico.

EFEITOS COLATERAIS

- O uso do Sistema pode causar os seguintes efeitos colaterais:
- Infecção localizada na zona operatória ou infecção sistêmica que possa comprometer o sucesso do procedimento ou infecção óssea;
- Febre;
- Fenômenos Inflamatórios locais importantes. Alergia ou intolerância suspeita ou conhecida aos metais que compõem o sistema;
- Curvatura ou quebra do produto ou afrouxamento no local
- Dor causada pela cicatrização;
- Perda óssea ou diminuição da densidade óssea devido à proteção de stress;
- Falha ou soltura ou quebra dos implantes devido ao retardo ou a não consolidação da fratura;
- Perda da redução, do alinhamento, da estabilização e da fixação óssea do procedimento cirúrgico incorreto para implantação do produto médico;
- Sensibilidade de partes moles, pele e músculos causada pela cirurgia ou devidos ao implante ou à cobertura inadequada da pele;
- Implantação não adequada ou esforços excessivos sobre o implante que podem levar a sua soltura, migração ou fratura;
- Pode ocorrer encurtamento ósseo devido à consolidação óssea inadequada ou reabsorção óssea;
- Pseudartrose causando fratura dos implantes;
- Processo de metalose;
- Vascularização insuficiente podendo ocasionar necrose óssea, dos tecidos humanos ou das partes moles adjacentes ao implante;
- Pressão na pele devido às placas e parafusos estarem com inadequada cobertura de tecidos;
- Restrição às atividades físicas diárias que causem força sobre a região do corpo onde foi implantado o produto;



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

- O não cumprimento por parte do paciente às recomendações médicas para o pós-operatório pode resultar na quebra ou na soltura do implante;
- Caso seja observado algum Efeito Adverso ou haja necessidade de realização de Queixa Técnica deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que pode ser encontrado no *site* da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no endereço <http://portal.anvisa.gov.br/>, link NOTIVISA – Notificações em Vigilância Sanitária, seguindo a legislação conforme RDC 67/2009 e RDC 551/2021.

CUIDADOS RELACIONADOS À RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

O dispositivo é condicional para o uso em ressonância magnética. O paciente poderá ser seguramente submetido a procedimentos de ressonância magnética sob as seguintes condições:

- Campo magnético de 3 e 1,5 Tesla apenas.
Nenhuma restrição para o campo magnético do gradiente espacial;
- Para um implante ortopédico interno passivo localizado dentro da área da energia de RF transmitida, use uma taxa de absorção específica (SAR) média de corpo inteiro de 2 W/kg (ou seja, operando o sistema de RM no modo de operação normal);
- Não há restrição para a energia de RF;
- Tempo máximo de imagem, 15 minutos por sequência de pulso (são permitidas múltiplas sequências de pulso).

TÉCNICA CIRÚRGICA

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção “INDICAÇÃO DE USO”
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “CONTRA-INDICAÇÕES”, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A escolha sobre a melhor placa/parafuso é de responsabilidade da equipe técnica responsável pela cirurgia a qual deve levar em consideração a indicação de uso das placas, patologia do paciente, além de considerar toda a experiência pré-existente.

Para a melhor combinação placa-parafuso a equipe médica deve considerar a associação do Anexo 2.

PROCEDIMENTOS INTRAOPERATÓRIOS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

Orientações pós-operatórias e advertências aos pacientes pelos médicos e a colaboração do paciente para seguir as instruções são extremamente importantes:

- O paciente deve ser instruído sobre as suas limitações e ser orientado para dirigir suas atividades de acordo.
- O paciente deve estar ciente que o excesso de peso durante o período de reabilitação pós-operatória pode resultar em encurvamento, afrouxamento ou fratura.
- Uma ausência de consolidação óssea persistente resultará em uma carga excessiva que repetidamente se aplicará ao implante, eventualmente conduzindo ao encurvamento, afrouxamento ou até mesmo fratura do dispositivo. No caso de uma ausência de consolidação persistente, ou se os componentes começarem a afrouxar, encurvar, e/ou quebrarem, o dispositivo deve ser revisado e/ou removido sem demora, antes que sérios danos ocorram.
- Todo material de síntese óssea, seja ele uma placa, parafuso, são implantados para dar uma fixação temporária na fratura. A finalidade dos implantes é manter a fratura estável por um período de tempo em que a consolidação óssea se forma.

PROCEDIMENTOS DE TÉCNICA CIRÚRGICA

Os instrumentais citados na técnica cirúrgica não fazem parte deste registro, devem ser adquiridos à parte.

- Os implantes devem ser aplicados num ambiente estéril.
- O cirurgião deverá definir através de exames (ex.: Raio-x), o implante mais adequado à fratura / condição clínica do paciente, através do domínio médico da especialidade ortopédica.
- Caso a condição da fratura e do paciente permitam, conduzir a redução da fratura por tracionamento antes da implantação do implante.
- Seguir a técnica padrão de fixação rígida para a colocação dos implantes, que se resume nos seguintes passos:
 - Efetuar a incisão cirúrgica na região da fratura, afastando as partes moles com uso de afastador.
 - Usar o Guia de perfuração e a ponta de guia no 1 contato com o osso e fazer o furo no osso com a Broca;
 - Medir o furo com o medidor de profundidade e selecionar o tamanho do parafuso;
 - Escarear / machear o furo;
 - Montar cabo e ponta de chave aplicável
 - Posicionar a placa e introduzir o parafuso, com a chave;
 - Repetir a furação, escareamento, o machiamento e a introdução dos parafusos, até a região fraturada;
 - Efetuar/ conferir a estabilização da fratura, utilizando pinças – se necessário;
 - Verificar a implantação (se todos os parafusos estão apertados, se o osso está estabilizado, verificar se não há movimentação da placa)
 - Reposiciona as partes moles e conduzir o fechamento da região operada.
 - Para procedimento cirúrgico de remoção, primeiro desrosqueie todos os parafusos, e caso haja placa, removê-la definitivamente.

ESTERILIZAÇÃO



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

O sistema é fornecido **NÃO ESTERIL** e **DEVE SER ESTERILIZADO ANTES DO USO**. Recomenda-se o seguinte procedimento de esterilização do produto:

- Os procedimentos de esterilização, bem como a qualidade e o treinamento do pessoal envolvido neste processo é de inteira responsabilidade do serviço de saúde e dos profissionais envolvidos.
- O local de esterilização do produto (CME) deverá proceder todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-los ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave).
- A manipulação do produto não apresenta nenhuma particularidade técnica a ser alertada ao pessoal da CME, desde que obedecidas às recomendações aqui já explicitadas.
- Os produtos não necessitam de limpeza/desinfecção anterior ao processo de esterilização uma vez que o produto é entregue devidamente limpo.
- A MediMed recomenda o que os produtos sejam submetidos ao processo de esterilização Autoclave a vapor antes da cirurgia, respeitando as normas vigentes da ANVISA e do Ministério da Saúde e norma ABNT NBR ISO 17665-1 – Esterilização de produtos para saúde – Vapor – Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde, considerando os seguintes parâmetros:
- Temperatura de esterilização: 134°C
- Tempo de esterilização: 18 minutos
- A validação dos parâmetros do processo de esterilização de acordo com o tipo específico de equipamento disponível no hospital é extremamente importante, assim como a correta manutenção corretiva e preventiva do equipamento de esterilização.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

As peças devem ser acondicionadas em local fresco e seco, e devem ser mantidas fora da luz solar direta.

Não é recomendado a acomodação ou empilhamento de outros produtos/objetos pesados sobre estes dispositivos, em qualquer etapa de transporte desde sua distribuição até o manuseio em ambiente de centro cirúrgico, uma vez que esse procedimento pode causar dano (falhas, trincas ou quebras) aos itens desse registro, levando ao descarte.

O transporte do produto deve ser feito em suas embalagens originais, acondicionados em caixas secundárias de forma apropriada, conforme procedimentos das Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento.

DESCARTE DO PRODUTO

Deverão ser descartados produtos explantados, produtos que sofram queda ou choque durante o transporte ou manuseio, bem como, produtos que apresentem avarias ou alterações de outras características intrínsecas do produto.

Os métodos de descarte dos dispositivos devem assegurar sua completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de reutilização. A descaracterização do componente é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedimentos de descarte de dispositivos implantáveis de qualquer natureza. Produtos explantados devem ter destinação apropriada conforme as normas de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital, obedecendo às diretrizes ambientais locais.

Toda a documentação do produto a ser descartado deverá ser mantida em arquivo para eventual comprovação no caso de fiscalização da autoridade sanitária, o fornecedor local deve ser informado, de forma que o mesmo mantenha as condições de rastreabilidade do produto.



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda
Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

As embalagens das peças possuem um rótulo do fabricante, fixado externamente à embalagem, o qual possui as informações necessárias para identificação e rastreabilidade das peças. Além disso, as peças possuem marcações a laser de lote e referência, que ajudam na rastreabilidade.

O fabricante disponibilizará três etiquetas de rastreabilidade do dispositivo para fixação obrigatória: no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

COMPONENTES

Anexo 1

COMPOSIÇÃO

PLACAS: Titânio Puro Gr 4 NBR 5832-2

PARAFUSOS: Liga de Titânio 6Al 4V NBR 5832-3

ROTULAGEM DO PRODUTO:

Para o produto comercializado, os seguintes símbolos podem ser indicados nas etiquetas colocadas na embalagem:

	PRODUTO DE USO ÚNICO		NÃO UTILIZE SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA
	MANUAL DE INSTRUÇÕES ONLINE		FRÁGIL, MANIPULE COM CUIDADO
	LOTE		NÚMERO NO CATÁLOGO
	FABRICANTE		DATA DE FABRICAÇÃO
	CONDICIONAL A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		NÃO ESTÉRIL
	MANTENHA DISTANTE DE SOL		MANTENHA SECO

Os produtos possuem manual de instruções que devem ser acessados online para correta correlação com o rotulado. Para correlação do produto rotulado junto a esta instrução de uso (IU), deve-se verificar o número de registro Anvisa escrito no manual e o impresso na rotulagem, bem como a versão 0.0 das IU. Para acesso ao manual online, deve-se acessar o site <http://medimed.com.br/> identificar o botão “Instruções de uso” no canto superior da tela, identificar o produto a ser acessado pelo nome e clicar no botão correspondente. O manual será identificado pelo nome do produto e número de registro Anvisa XXXXX. As IU poderão ser solicitadas SAC +55 19 32693993 ou contato@medimed.com.br onde serão encaminhadas via correios em formato impresso ou por e-mail em formato não impresso, sem custo adicional. A MediMed disponibilizará as IU deste produto durante todo o período de comercialização e validade de registro do mesmo no mercado nacional.

Modelo, Número de Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade:

VER NA ROTULAGEM DO PRODUTO



Medimed Valinhos Ortopedia Ltda

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

**Medimed Valinhos Ortopedia Ltda**

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

INSTRUÇÕES DE USO

Registro ANVISA nº: 82526010012

Responsável Técnico: Vanderson Migoto, CREA-SP n 5070942123

 **Fabricante Legal e detentor do registro:**

**Medimed Valinhos Ortopedia Ltda**

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

**Medimed Valinhos Ortopedia Ltda**

Alameda Itajubá, 1844 - Bairro Joapiranga, Valinhos (SP), 13278-530, Brasil
CNPJ 33.537.633/0001-92

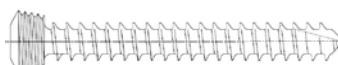
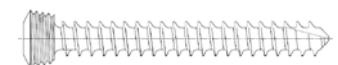


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

Código	Descrição	Dimensão [mm]	Ilustração
MM-295.10	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 10	
MM-295.12	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 12	
MM-295.14	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 14	
MM-295.16	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 16	
MM-295.18	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 18	
MM-295.20	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 20	
MM-295.22	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 22	
MM-295.24	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 24	
MM-295.26	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 26	
MM-295.28	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 28	
MM-295.30	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 30	
MM-295.32	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 32	
MM-295.34	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 34	
MM-295.36	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 36	
MM-295.38	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 38	
MM-295.40	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 40	
MM-295.45	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 45	
MM-295.50	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 50	
MM-295.1.10	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 10	
MM-295.1.12	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 12	
MM-295.1.14	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 14	
MM-295.1.16	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 16	
MM-295.1.18	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 18	
MM-295.1.20	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 20	
MM-295.1.22	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 22	
MM-295.1.24	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 24	
MM-295.1.26	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 26	
MM-295.1.28	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 28	
MM-295.1.30	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 30	
MM-295.1.32	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 32	
MM-295.1.34	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 34	
MM-295.1.36	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 36	

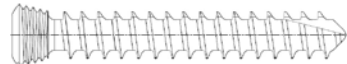


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-295.1.38	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 38	
MM-295.1.40	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 40	
MM-295.1.45	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 45	
MM-295.1.50	PARAFUSO LISO MEDHEX Ø2,7 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 50	
MM-295.2.08	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 08 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 08	
MM-295.2.10	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 10	
MM-295.2.12	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 12	
MM-295.2.14	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 14	
MM-295.2.16	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 16	
MM-295.2.18	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 18	
MM-295.2.20	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 20	
MM-295.2.22	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 22	
MM-295.2.24	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 24	
MM-295.2.26	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 26	
MM-295.2.28	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 28	
MM-295.2.30	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 30	
MM-295.2.32	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 32	
MM-295.2.34	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 34	
MM-295.2.36	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 36	
MM-295.2.38	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 38	
MM-295.2.40	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 40	
MM-295.2.45	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 45	
MM-295.2.50	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,4 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,4 X 50	
MM-296.10	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 10	
MM-296.12	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 12	
MM-296.14	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 14	
MM-296.16	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 16	
MM-296.18	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 18	
MM-296.20	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 20	
MM-296.22	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 22	
MM-296.24	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 24	
MM-296.26	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 26	

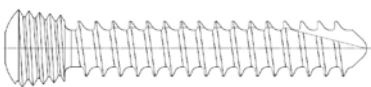


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-296.28	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 28	
MM-296.30	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 30	
MM-296.32	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 32	
MM-296.34	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 34	
MM-296.36	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 36	
MM-296.38	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 38	
MM-296.40	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 40	
MM-296.45	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 45	
MM-296.50	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø2,7 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø2,7 X 50	
MM-297.10	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 10	
MM-297.12	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 12	
MM-297.14	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 14	
MM-297.16	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 16	
MM-297.18	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 18	
MM-297.20	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 20	
MM-297.22	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 22	
MM-297.24	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 24	
MM-297.26	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 26	
MM-297.28	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 28	
MM-297.30	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 30	
MM-297.32	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 32	
MM-297.34	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 34	
MM-297.36	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 36	
MM-297.38	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 38	
MM-297.40	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 40	
MM-297.42	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 42	
MM-297.44	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 44	
MM-297.46	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 46	
MM-297.48	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 48	
MM-297.50	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 50	
MM-297.52	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 52	
MM-297.54	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 54	
MM-297.56	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 56	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-297.58	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 58	
MM-297.60	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 60	
MM-297.62	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 62	
MM-297.64	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 64	
MM-297.66	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 66	
MM-297.68	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 68	
MM-297.70	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 70	
MM-297.75	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 75	
MM-297.80	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 80	
MM-297.85	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 85	
MM-297.90	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 90	
MM-297.95	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 95	
MM-297.100	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 100	
MM-297.105	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 105	
MM-297.110	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 110	
MM-297.115	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 115	
MM-297.120	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 120	
MM-297.125	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 125	
MM-297.130	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 130	
MM-297.135	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 135	
MM-297.140	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 140	
MM-297.145	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 145	
MM-297.150	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø3,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø3,5 X 150	
MM-298.10	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 10	
MM-298.12	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 12	
MM-298.14	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 14	
MM-298.16	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 16	
MM-298.18	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 18	
MM-298.20	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 20	
MM-298.22	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 22	
MM-298.24	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 24	
MM-298.26	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 26	
MM-298.28	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 28	

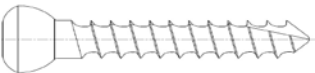


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-298.30	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 30	
MM-298.32	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 32	
MM-298.34	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 34	
MM-298.36	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 36	
MM-298.38	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 38	
MM-298.40	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 40	
MM-298.42	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 42	
MM-298.44	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 44	
MM-298.46	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 46	
MM-298.48	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 48	
MM-298.50	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 50	
MM-298.52	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 52	
MM-298.54	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 54	
MM-298.56	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 56	
MM-298.58	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 58	
MM-298.60	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 60	
MM-298.62	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 62	
MM-298.64	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 64	
MM-298.66	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 66	
MM-298.68	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 68	
MM-298.70	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 70	
MM-298.75	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 75	
MM-298.80	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 80	
MM-298.85	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 85	
MM-298.90	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 90	
MM-298.95	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 95	
MM-298.100	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 100	
MM-298.105	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 105	
MM-298.110	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 110	
MM-298.115	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 115	
MM-298.120	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 120	
MM-298.125	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 125	
MM-298.130	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 130	
MM-298.135	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 135	

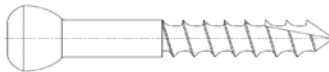


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-298.140	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 140	
MM-298.145	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 145	
MM-298.150	PARAFUSO DE BLOQUEIO MEDHEX Ø4,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE	Ø4,5 X 150	
MM-253.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 10	
MM-253.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 12	
MM-253.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 14	
MM-253.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 16	
MM-253.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 18	
MM-253.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 20	
MM-253.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 22	
MM-253.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 24	
MM-253.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 26	
MM-253.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 28	
MM-253.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 30	
MM-253.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 32	
MM-253.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 34	
MM-253.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 36	
MM-253.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 38	
MM-253.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 40	
MM-253.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 42	
MM-253.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 44	
MM-253.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 46	
MM-253.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 48	
MM-253.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 50	
MM-253.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 52	
MM-253.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 54	
MM-253.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 56	
MM-253.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 58	
MM-253.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 60	
MM-253.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 62	
MM-253.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 64	
MM-253.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 66	
MM-253.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 68	

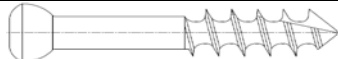


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-253.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 70	
MM-253.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 75	
MM-253.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 80	
MM-253.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 85	
MM-253.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 90	
MM-253.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 95	
MM-253.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 100	
MM-253.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 105	
MM-253.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 110	
MM-253.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 115	
MM-253.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 120	
MM-253.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 125	
MM-253.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 130	
MM-253.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 135	
MM-253.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 140	
MM-253.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 145	
MM-253.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,5 X 150	
MM-254.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 10	
MM-254.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 12	
MM-254.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 14	
MM-254.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 16	
MM-254.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 18	
MM-254.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 20	
MM-254.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 22	
MM-254.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 24	
MM-254.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 26	
MM-254.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 28	
MM-254.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 30	
MM-254.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 32	
MM-254.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 34	
MM-254.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 36	
MM-254.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 38	
MM-254.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 40	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-254.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 42	
MM-254.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 44	
MM-254.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 46	
MM-254.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 48	
MM-254.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 50	
MM-254.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 52	
MM-254.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 54	
MM-254.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 56	
MM-254.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 58	
MM-254.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 60	
MM-254.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 62	
MM-254.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 64	
MM-254.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 66	
MM-254.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 68	
MM-254.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 70	
MM-254.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 75	
MM-254.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 80	
MM-254.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 85	
MM-254.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 90	
MM-254.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 95	
MM-254.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 100	
MM-254.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 105	
MM-254.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 110	
MM-254.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 115	
MM-254.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 120	
MM-254.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 125	
MM-254.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 130	
MM-254.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 135	
MM-254.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 140	
MM-254.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 145	
MM-254.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø4,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,5 X 150	
MM-255.26	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 26	
MM-255.28	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 28	

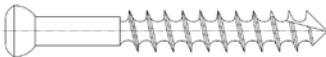


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-255.30	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 30	
MM-255.32	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 32	
MM-255.34	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 34	
MM-255.36	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 36	
MM-255.38	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 38	
MM-255.40	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 40	
MM-255.42	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 42	
MM-255.44	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 44	
MM-255.46	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 46	
MM-255.48	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 48	
MM-255.50	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 50	
MM-255.52	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 52	
MM-255.54	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 54	
MM-255.56	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 56	
MM-255.58	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 58	
MM-255.60	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 60	
MM-255.62	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 62	
MM-255.64	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 64	
MM-255.66	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 66	
MM-255.68	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 68	
MM-255.70	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 70	
MM-255.75	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 75	
MM-255.80	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 80	
MM-255.85	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 85	
MM-255.90	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 90	
MM-255.95	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 95	
MM-255.100	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 100	
MM-255.105	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 105	
MM-255.110	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 110	
MM-255.115	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 115	
MM-255.120	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 120	
MM-255.125	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 125	
MM-255.130	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 130	
MM-255.135	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 135	

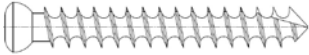


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-255.140	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 140	
MM-255.145	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 145	
MM-255.150	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 16	Ø6,5 X 150	
MM-256.42	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 42	
MM-256.44	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 44	
MM-256.46	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 46	
MM-256.48	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 48	
MM-256.50	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 50	
MM-256.52	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 52	
MM-256.54	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 54	
MM-256.56	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 56	
MM-256.58	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 58	
MM-256.60	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 60	
MM-256.62	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 62	
MM-256.64	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 64	
MM-256.66	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 66	
MM-256.68	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 68	
MM-256.70	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 70	
MM-256.75	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 75	
MM-256.80	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 80	
MM-256.85	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 85	
MM-256.90	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 90	
MM-256.95	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 95	
MM-256.100	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 100	
MM-256.105	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 105	
MM-256.110	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 110	
MM-256.115	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 115	
MM-256.120	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 120	
MM-256.125	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 125	
MM-256.130	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 130	
MM-256.135	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 135	
MM-256.140	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 140	
MM-256.145	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 145	

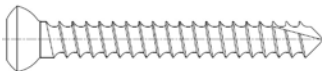


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-256.150	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA 32	Ø6,5 X 150	
MM-257.20	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 20	
MM-257.22	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 22	
MM-257.24	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 24	
MM-257.26	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 26	
MM-257.28	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 28	
MM-257.30	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 30	
MM-257.32	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 32	
MM-257.34	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 34	
MM-257.36	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 36	
MM-257.38	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 38	
MM-257.40	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 40	
MM-257.42	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 42	
MM-257.44	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 44	
MM-257.46	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 46	
MM-257.48	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 48	
MM-257.50	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 50	
MM-257.52	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 52	
MM-257.54	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 54	
MM-257.56	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 56	
MM-257.58	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 58	
MM-257.60	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 60	
MM-257.62	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 62	
MM-257.64	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 64	
MM-257.66	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 66	
MM-257.68	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 68	
MM-257.70	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 70	
MM-257.75	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 75	
MM-257.80	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 80	
MM-257.85	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 85	
MM-257.90	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 90	
MM-257.95	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 95	
MM-257.100	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 100	

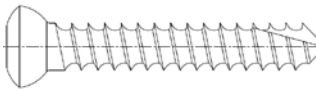


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-257.105	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 105	
MM-257.110	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 110	
MM-257.115	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 115	
MM-257.120	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 120	
MM-257.125	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 125	
MM-257.130	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 130	
MM-257.135	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 135	
MM-257.140	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 140	
MM-257.145	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 145	
MM-257.150	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø6,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø6,5 X 150	
MM-245.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 10	
MM-245.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 12	
MM-245.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 14	
MM-245.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 16	
MM-245.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 18	
MM-245.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 20	
MM-245.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 22	
MM-245.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 24	
MM-245.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 26	
MM-245.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 28	
MM-245.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 30	
MM-245.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 32	
MM-245.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 34	
MM-245.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 36	
MM-245.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 38	
MM-245.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 40	
MM-245.45	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 45	
MM-245.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø2,7 X 50	
MM-246.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 10	
MM-246.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 12	
MM-246.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 14	
MM-246.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 16	

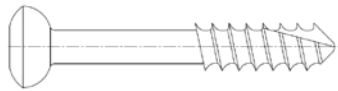


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-246.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 18	
MM-246.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 20	
MM-246.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 22	
MM-246.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 24	
MM-246.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 26	
MM-246.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 28	
MM-246.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 30	
MM-246.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 32	
MM-246.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 34	
MM-246.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 36	
MM-246.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 38	
MM-246.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 40	
MM-246.45	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 45 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 45	
MM-246.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø2,7 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø2,7 X 50	
MM-247.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 10	
MM-247.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 12	
MM-247.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 14	
MM-247.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 16	
MM-247.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 18	
MM-247.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 20	
MM-247.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 22	
MM-247.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 24	
MM-247.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 26	
MM-247.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 28	
MM-247.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 30	
MM-247.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 32	
MM-247.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 34	
MM-247.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 36	
MM-247.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 38	
MM-247.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 40	
MM-247.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 42	
MM-247.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 44	
MM-247.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 46	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-247.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 48	
MM-247.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 50	
MM-247.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 52	
MM-247.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 54	
MM-247.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 56	
MM-247.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 58	
MM-247.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 60	
MM-247.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 62	
MM-247.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 64	
MM-247.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 66	
MM-247.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 68	
MM-247.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 70	
MM-247.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 75	
MM-247.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 80	
MM-247.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 85	
MM-247.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 90	
MM-247.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 95	
MM-247.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 100	
MM-247.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 105	
MM-247.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 110	
MM-247.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 115	
MM-247.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 120	
MM-247.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 125	
MM-247.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 130	
MM-247.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 135	
MM-247.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 140	
MM-247.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 145	
MM-247.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RT	Ø3,5 X 150	
MM-248.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 10	
MM-248.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 12	
MM-248.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 14	
MM-248.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 16	
MM-248.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 18	

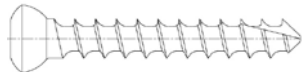


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-248.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 20	
MM-248.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 22	
MM-248.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 24	
MM-248.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 26	
MM-248.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 28	
MM-248.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 30	
MM-248.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 32	
MM-248.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 34	
MM-248.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 36	
MM-248.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 38	
MM-248.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 40	
MM-248.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 42	
MM-248.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 44	
MM-248.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 46	
MM-248.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 48	
MM-248.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 50	
MM-248.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 52	
MM-248.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 54	
MM-248.55	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 55 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 55	
MM-248.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 56	
MM-248.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 58	
MM-248.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 60	
MM-248.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 62	
MM-248.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 64	
MM-248.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 66	
MM-248.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 68	
MM-248.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 70	
MM-248.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 75	
MM-248.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 80	
MM-248.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 85	
MM-248.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 90	
MM-248.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 95	
MM-248.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 100	
MM-248.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 105	

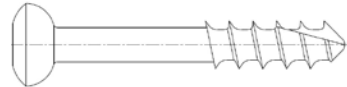


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-248.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 110	
MM-248.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 115	
MM-248.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 120	
MM-248.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 125	
MM-248.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 130	
MM-248.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 135	
MM-248.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 140	
MM-248.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 145	
MM-248.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA FINA RP	Ø3,5 X 150	
			
MM-249.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 10	
MM-249.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 12	
MM-249.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 14	
MM-249.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 16	
MM-249.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 18	
MM-249.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 20	
MM-249.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 22	
MM-249.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 24	
MM-249.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 26	
MM-249.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 28	
MM-249.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 30	
MM-249.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 32	
MM-249.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 34	
MM-249.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 36	
MM-249.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 38	
MM-249.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 40	
MM-249.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 42	
MM-249.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 44	
MM-249.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 46	
MM-249.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 48	
MM-249.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 50	
MM-249.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 52	
MM-249.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 54	
MM-249.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 56	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-249.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 58	
MM-249.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 60	
MM-249.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 62	
MM-249.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 64	
MM-249.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 66	
MM-249.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 68	
MM-249.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 70	
MM-249.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 75	
MM-249.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 80	
MM-249.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 85	
MM-249.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 90	
MM-249.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 95	
MM-249.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 100	
MM-249.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 105	
MM-249.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 110	
MM-249.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 115	
MM-249.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 120	
MM-249.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 125	
MM-249.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 130	
MM-249.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 135	
MM-249.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 140	
MM-249.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 145	
MM-249.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE RT	Ø3,5 X 150	
MM-250.10	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 10	
MM-250.12	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 12	
MM-250.14	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 14	
MM-250.16	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 16	
MM-250.18	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 18	
MM-250.20	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 20	
MM-250.22	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 22	
MM-250.24	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 24	
MM-250.26	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 26	
MM-250.28	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 28	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-250.30	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 30	
MM-250.32	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 32	
MM-250.34	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 34	
MM-250.36	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 36	
MM-250.38	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 38	
MM-250.40	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 40	
MM-250.42	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 42	
MM-250.44	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 44	
MM-250.46	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 46	
MM-250.48	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 48	
MM-250.50	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 50	
MM-250.52	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 52	
MM-250.54	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 54	
MM-250.56	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 56	
MM-250.58	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 58	
MM-250.60	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 60	
MM-250.62	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 62	
MM-250.64	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 64	
MM-250.66	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 66	
MM-250.68	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 68	
MM-250.70	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 70	
MM-250.75	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 75	
MM-250.80	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 80	
MM-250.85	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 85	
MM-250.90	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 90	
MM-250.95	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 95	
MM-250.100	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 100	
MM-250.105	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 105	
MM-250.110	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 110	
MM-250.115	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 115	
MM-250.120	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 120	
MM-250.125	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 125	
MM-250.130	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 130	
MM-250.135	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 135	

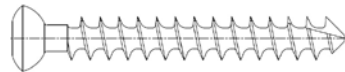


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-250.140	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 140	
MM-250.145	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 145	
MM-250.150	PARAFUSO CORTICAL MEDHEX Ø3,5 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE RP	Ø3,5 X 150	
MM-251.10	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 10	
MM-251.12	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 12	
MM-251.14	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 14	
MM-251.16	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 16	
MM-251.18	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 18	
MM-251.20	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 20	
MM-251.22	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 22	
MM-251.24	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 24	
MM-251.26	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 26	
MM-251.28	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 28	
MM-251.30	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 30	
MM-251.32	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 32	
MM-251.34	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 34	
MM-251.36	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 36	
MM-251.38	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 38	
MM-251.40	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 40	
MM-251.42	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 42	
MM-251.44	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 44	
MM-251.46	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 46	
MM-251.48	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 48	
MM-251.50	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 50	
MM-251.52	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 52	
MM-251.54	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 54	
MM-251.56	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 56	
MM-251.58	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 58	
MM-251.60	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 60	
MM-251.62	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 62	
MM-251.64	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 64	
MM-251.66	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 66	
MM-251.68	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 68	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-251.70	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 70	
MM-251.75	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 75	
MM-251.80	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 80	
MM-251.85	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 85	
MM-251.90	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 90	
MM-251.95	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 95	
MM-251.100	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 100	
MM-251.105	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 105	
MM-251.110	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 110	
MM-251.115	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 115	
MM-251.120	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 120	
MM-251.125	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 125	
MM-251.130	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 130	
MM-251.135	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 135	
MM-251.140	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 140	
MM-251.145	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 145	
MM-251.150	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA PARCIAL	Ø4,0 X 150	
MM-252.10	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 10 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 10	
MM-252.12	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 12 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 12	
MM-252.14	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 14 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 14	
MM-252.16	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 16 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 16	
MM-252.18	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 18 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 18	
MM-252.20	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 20 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 20	
MM-252.22	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 22 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 22	
MM-252.24	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 24 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 24	
MM-252.26	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 26 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 26	
MM-252.28	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 28 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 28	
MM-252.30	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 30 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 30	
MM-252.32	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 32 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 32	
MM-252.34	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 34 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 34	
MM-252.36	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 36 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 36	
MM-252.38	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 38 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 38	
MM-252.40	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 40 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 40	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-252.42	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 42 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 42	
MM-252.44	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 44 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 44	
MM-252.46	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 46 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 46	
MM-252.48	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 48 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 48	
MM-252.50	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 50 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 50	
MM-252.52	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 52 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 52	
MM-252.54	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 54 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 54	
MM-252.56	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 56 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 56	
MM-252.58	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 58 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 58	
MM-252.60	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 60 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 60	
MM-252.62	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 62 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 62	
MM-252.64	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 64 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 64	
MM-252.66	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 66 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 66	
MM-252.68	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 68 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 68	
MM-252.70	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 70 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 70	
MM-252.75	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 75 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 75	
MM-252.80	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 80 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 80	
MM-252.85	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 85 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 85	
MM-252.90	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 90 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 90	
MM-252.95	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 95 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 95	
MM-252.100	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 100 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 100	
MM-252.105	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 105 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 105	
MM-252.110	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 110 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 110	
MM-252.115	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 115 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 115	
MM-252.120	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 120 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 120	
MM-252.125	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 125 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 125	
MM-252.130	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 130 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 130	
MM-252.135	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 135 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 135	
MM-252.140	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 140 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 140	
MM-252.145	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 145 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 145	
MM-252.150	PARAFUSO ESPONJOSO MEDHEX Ø4,0 X 150 MM AUTO ROSQUEANTE ROSCA TOTAL	Ø4,0 X 150	

Código	Descrição	Dimensão [mm]	Ilustração
--------	-----------	---------------	------------



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

		Comprimento	
MM-500.1.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-500.1.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUIROS	69	
MM-500.1.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUIROS	77	
MM-500.1.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUIROS	85	
MM-500.1.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUIROS	93	
MM-500.1.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUIROS	101	
MM-500.1.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUIROS	109	
MM-500.1.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUIROS	117	
MM-500.1.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUIROS	125	
MM-500.1.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUIROS	133	
MM-500.2.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-500.2.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 02 FUIROS	69	
MM-500.2.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 03 FUIROS	77	
MM-500.2.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 04 FUIROS	85	
MM-500.2.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 05 FUIROS	93	
MM-500.2.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 06 FUIROS	101	
MM-500.2.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 07 FUIROS	109	
MM-500.2.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 08 FUIROS	117	
MM-500.2.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 09 FUIROS	125	
MM-500.2.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 10 FUIROS	133	
MM-500.3.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-500.3.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUIROS	69	
MM-500.3.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUIROS	77	
MM-500.3.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUIROS	85	
MM-500.3.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUIROS	93	
MM-500.3.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUIROS	101	
MM-500.3.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUIROS	109	
MM-500.3.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUIROS	117	
MM-500.3.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUIROS	125	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.3.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	133	
MM-500.4.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-500.4.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	69	
MM-500.4.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	77	
MM-500.4.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	85	
MM-500.4.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	93	
MM-500.4.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	101	
MM-500.4.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	109	
MM-500.4.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	117	
MM-500.4.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	125	
MM-500.4.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	133	
MM-500.5.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-500.5.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	50	
MM-500.5.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-500.5.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-500.5.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-500.5.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-500.5.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-500.5.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	98	
MM-500.5.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-500.5.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-500.6.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-500.6.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	50	
MM-500.6.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-500.6.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-500.6.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-500.6.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-500.6.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-500.6.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	98	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.6.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-500.6.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-500.7.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-500.7.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	50	
MM-500.7.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-500.7.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-500.7.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-500.7.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-500.7.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-500.7.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	98	
MM-500.7.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-500.7.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-500.8.01	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-500.8.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	50	
MM-500.8.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-500.8.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-500.8.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-500.8.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-500.8.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-500.8.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	98	
MM-500.8.09	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-500.8.10	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA HOOK DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-500.9.01	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 01 FURO	27	
MM-500.9.02	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 02 FUROS	37	
MM-500.9.03	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 03 FUROS	47	
MM-500.9.04	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 04 FUROS	57	
MM-500.9.05	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 05 FUROS	67	
MM-500.9.06	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 06 FUROS	77	
MM-500.9.07	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 07 FUROS	87	

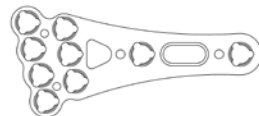
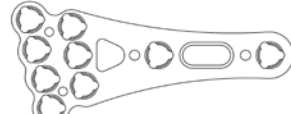
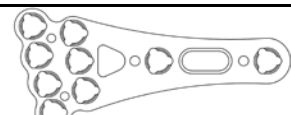


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.9.08	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 08 FUROS	97	
MM-500.9.09	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 09 FUROS	107	
MM-500.9.10	PLACA CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA 10 FUROS	117	
MM-500.10.01	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 01 FURO	27	
MM-500.10.02	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 02 FUROS	37	
MM-500.10.03	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 03 FUROS	47	
MM-500.10.04	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 04 FUROS	57	
MM-500.10.05	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 05 FUROS	67	
MM-500.10.06	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 06 FUROS	77	
MM-500.10.07	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 07 FUROS	87	
MM-500.10.08	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 08 FUROS	97	
MM-500.10.09	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 09 FUROS	107	
MM-500.10.10	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO 2,7 BLOQUEADA ANGULADA 10 FUROS	117	
MM-500.11.01	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 01 FURO	27	
MM-500.11.02	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 02 FUROS	37	
MM-500.11.03	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 03 FUROS	47	
MM-500.11.04	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 04 FUROS	57	
MM-500.11.05	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 05 FUROS	67	
MM-500.11.06	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 06 FUROS	77	
MM-500.11.07	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 07 FUROS	87	
MM-500.11.08	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 08 FUROS	97	
MM-500.11.09	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 09 FUROS	107	
MM-500.11.10	PLACA MEDPLATE CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA ANGULADA 10 FUROS	117	
MM-500.12.01	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 01 FURO	27	
MM-500.12.02	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 02 FUROS	37	
MM-500.12.03	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 03 FUROS	47	
MM-500.12.04	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 04 FUROS	57	
MM-500.12.05	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 05 FUROS	67	
MM-500.12.06	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 06 FUROS	77	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.12.07	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 07 FUROS	87	
MM-500.12.08	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 08 FUROS	97	
MM-500.12.09	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 09 FUROS	107	
MM-500.12.10	PLACA CABEÇA DE RADIO BLOQUEADA 10 FUROS	117	
MM-500.13.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 02 FUROS	47	
MM-500.13.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 03 FUROS	56	
MM-500.13.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 04 FUROS	70	
MM-500.13.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 05 FUROS	100	
MM-500.14.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 02 FUROS	47	
MM-500.14.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 03 FUROS	56	
MM-500.14.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 04 FUROS	70	
MM-500.14.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 05 FUROS	100	
MM-500.15.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA 02 FUROS	47	
MM-500.15.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA 03 FUROS	56	
MM-500.15.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA 04 FUROS	70	
MM-500.15.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA 05 FUROS	100	
MM-500.16.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA 02 FUROS	47	
MM-500.16.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA 03 FUROS	56	
MM-500.16.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA 04 FUROS	70	
MM-500.16.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA 05 FUROS	100	
MM-500.17.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA 02 FUROS	47	
MM-500.17.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA 03 FUROS	56	
MM-500.17.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA 04 FUROS	70	
MM-500.17.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA 05 FUROS	100	
MM-500.18.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIRETA 02 FUROS	47	
MM-500.18.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIRETA 03 FUROS	56	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.18.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIRETA 04 FUROS	70	
MM-500.18.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIRETA 05 FUROS	100	
MM-500.19.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.19.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.19.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.19.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.19.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (COM ABA)	76	
MM-500.19.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.19.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.19.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.19.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.19.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (COM ABA)	116	
MM-500.19.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.20.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.20.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.20.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.20.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.20.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (COM ABA)	76	
MM-500.20.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.20.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.20.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.20.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.20.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (COM ABA)	116	
MM-500.20.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.21.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.21.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.21.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.21.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.21.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (COM ABA)	76	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.21.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.21.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.21.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.21.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.21.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (COM ABA)	116	
MM-500.21.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.22.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.22.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.22.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.22.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.22.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (COM ABA)	76	
MM-500.22.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.22.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.22.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.22.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.22.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (COM ABA)	116	
MM-500.22.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.23.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (SEM ABA)	44	
MM-500.23.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (SEM ABA)	52	
MM-500.23.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (SEM ABA)	60	
MM-500.23.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (SEM ABA)	68	
MM-500.23.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (SEM ABA)	76	
MM-500.23.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (SEM ABA)	84	
MM-500.23.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (SEM ABA)	92	
MM-500.23.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (SEM ABA)	100	
MM-500.23.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (SEM ABA)	108	
MM-500.23.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (SEM ABA)	116	
MM-500.23.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (SEM ABA)	124	
MM-500.24.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (SEM ABA)	44	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

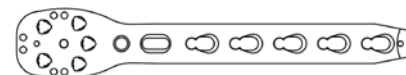
MM-500.24.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (SEM ABA)	52
MM-500.24.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (SEM ABA)	60
MM-500.24.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (SEM ABA)	68
MM-500.24.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (SEM ABA)	76
MM-500.24.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (SEM ABA)	84
MM-500.24.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (SEM ABA)	92
MM-500.24.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (SEM ABA)	100
MM-500.24.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (SEM ABA)	108
MM-500.24.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (SEM ABA)	116
MM-500.24.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (SEM ABA)	124
MM-500.25.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (SEM ABA)	44
MM-500.25.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (SEM ABA)	52
MM-500.25.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (SEM ABA)	60
MM-500.25.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (SEM ABA)	68
MM-500.25.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (SEM ABA)	76
MM-500.25.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (SEM ABA)	84
MM-500.25.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (SEM ABA)	92
MM-500.25.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (SEM ABA)	100
MM-500.25.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (SEM ABA)	108
MM-500.25.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (SEM ABA)	116
MM-500.25.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (SEM ABA)	124
MM-500.26.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (SEM ABA)	44
MM-500.26.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (SEM ABA)	52
MM-500.26.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (SEM ABA)	60
MM-500.26.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (SEM ABA)	68
MM-500.26.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (SEM ABA)	76
MM-500.26.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (SEM ABA)	84
MM-500.26.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (SEM ABA)	92
MM-500.26.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (SEM ABA)	100
MM-500.26.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (SEM ABA)	108





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

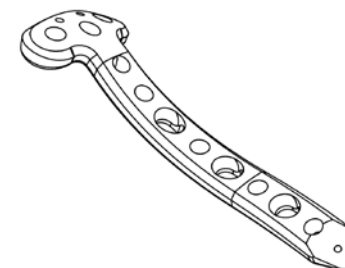
MM-500.26.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (SEM ABA)	116
MM-500.26.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (SEM ABA)	124
MM-500.46.02	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 02 FUROS	72
MM-500.46.03	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 03 FUROS	86
MM-500.46.04	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 04 FUROS	101
MM-500.46.05	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 05 FUROS	115
MM-500.46.06	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 06 FUROS	130
MM-500.46.07	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 07 FUROS	144
MM-500.46.08	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 08 FUROS	159
MM-500.46.09	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 09 FUROS	173
MM-500.46.10	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 10 FUROS	188
MM-500.46.11	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 11 FUROS	202
MM-500.46.12	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 12 FUROS	217
MM-500.46.13	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 13 FUROS	231
MM-500.46.14	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 14 FUROS	246
MM-500.46.15	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 15 FUROS	260
MM-500.46.16	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 16 FUROS	274
MM-500.46.17	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 17 FUROS	288
MM-500.46.18	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 18 FUROS	302
MM-500.46.19	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 19 FUROS	316
MM-500.46.20	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 20 FUROS	330
MM-500.47.02	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 02 FUROS	72
MM-500.47.03	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 03 FUROS	86
MM-500.47.04	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 04 FUROS	101
MM-500.47.05	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 05 FUROS	115
MM-500.47.06	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 06 FUROS	130
MM-500.47.07	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 07 FUROS	144
MM-500.47.08	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 08 FUROS	159
MM-500.47.09	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 09 FUROS	173
MM-500.47.10	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 10 FUROS	188





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.47.11	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 11 FUROS	202
MM-500.47.12	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 12 FUROS	217
MM-500.47.13	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 13 FUROS	231
MM-500.47.14	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 14 FUROS	246
MM-500.47.15	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 15 FUROS	260
MM-500.47.16	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 16 FUROS	274
MM-500.47.17	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 17 FUROS	288
MM-500.47.18	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 18 FUROS	302
MM-500.47.19	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 19 FUROS	316
MM-500.47.20	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 20 FUROS	330
MM-500.48.04	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 04 FUROS	120
MM-500.48.05	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 05 FUROS	124
MM-500.48.06	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 06 FUROS	148
MM-500.48.07	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 07 FUROS	172
MM-500.48.08	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 08 FUROS	196
MM-500.48.09	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 09 FUROS	220
MM-500.48.10	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 10 FUROS	244
MM-500.48.11	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 11 FUROS	268
MM-500.48.12	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 12 FUROS	292
MM-500.48.13	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 13 FUROS	316
MM-500.48.14	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 14 FUROS	340
MM-500.48.15	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 15 FUROS	364
MM-500.48.16	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 16 FUROS	388
MM-500.48.17	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 17 FUROS	412
MM-500.48.18	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 18 FUROS	436
MM-500.48.19	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 19 FUROS	460
MM-500.48.20	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LE 20 FUROS	484
MM-500.49.04	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 04 FUROS	120
MM-500.49.05	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 05 FUROS	124
MM-500.49.06	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 06 FUROS	148



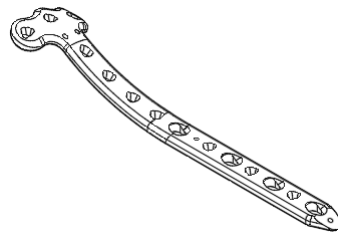
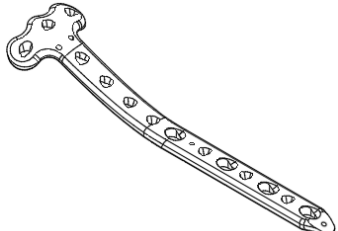


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.49.07	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 07 FUROS	172	
MM-500.49.08	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 08 FUROS	196	
MM-500.49.09	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 09 FUROS	220	
MM-500.49.10	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 10 FUROS	244	
MM-500.49.11	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 11 FUROS	268	
MM-500.49.12	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 12 FUROS	292	
MM-500.49.13	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 13 FUROS	316	
MM-500.49.14	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 14 FUROS	340	
MM-500.49.15	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 15 FUROS	364	
MM-500.49.16	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 16 FUROS	388	
MM-500.49.17	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 17 FUROS	412	
MM-500.49.18	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 18 FUROS	436	
MM-500.49.19	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 19 FUROS	460	
MM-500.49.20	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE MEDIAL BLOQUEADA LD 20 FUROS	484	
MM-500.50.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 04 FUROS	106	
MM-500.50.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 06 FUROS	126	
MM-500.50.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 08 FUROS	146	
MM-500.50.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 10 FUROS	166	
MM-500.50.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 12 FUROS	186	
MM-500.50.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 14 FUROS	206	
MM-500.50.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 16 FUROS	226	
MM-500.51.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 04 FUROS	106	
MM-500.51.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 06 FUROS	126	
MM-500.51.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 08 FUROS	146	
MM-500.51.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 10 FUROS	166	
MM-500.51.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 12 FUROS	186	
MM-500.51.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 14 FUROS	206	
MM-500.51.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 16 FUROS	226	
MM-500.52.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 04 FUROS	106	

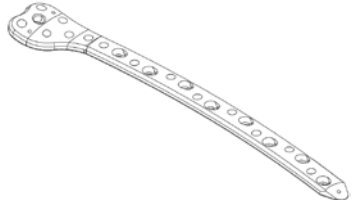
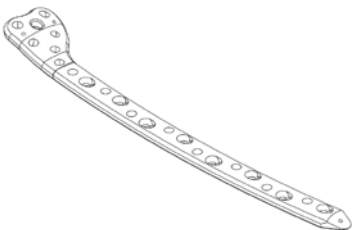


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.52.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 06 FUROS	126	
MM-500.52.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 08 FUROS	146	
MM-500.52.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 10 FUROS	166	
MM-500.52.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 12 FUROS	186	
MM-500.52.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 14 FUROS	206	
MM-500.52.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 16 FUROS	226	
MM-500.53.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 04 FUROS	106	
MM-500.53.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 06 FUROS	126	
MM-500.53.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 08 FUROS	146	
MM-500.53.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 10 FUROS	166	
MM-500.53.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 12 FUROS	186	
MM-500.53.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 14 FUROS	206	
MM-500.53.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 16 FUROS	226	
MM-500.54.02	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 02 FUROS	98	
MM-500.54.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 04 FUROS	118	
MM-500.54.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 06 FUROS	138	
MM-500.54.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 08 FUROS	158	
MM-500.54.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 10 FUROS	178	
MM-500.54.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 12 FUROS	198	
MM-500.54.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 14 FUROS	218	
MM-500.54.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 16 FUROS	238	
MM-500.55.02	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 02 FUROS	98	
MM-500.55.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 04 FUROS	118	
MM-500.55.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 06 FUROS	138	
MM-500.55.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 08 FUROS	158	
MM-500.55.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 10 FUROS	178	
MM-500.55.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 12 FUROS	198	
MM-500.55.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 14 FUROS	218	
MM-500.55.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 16 FUROS	238	

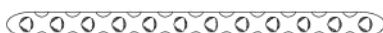


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.56.02	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 02 FUROS	88	
MM-500.56.04	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 04 FUROS	114	
MM-500.56.06	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 06 FUROS	140	
MM-500.56.08	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 08 FUROS	166	
MM-500.56.10	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 10 FUROS	192	
MM-500.56.12	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 12 FUROS	218	
MM-500.56.14	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 14 FUROS	244	
MM-500.56.16	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 16 FUROS	270	
MM-500.56.18	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 18 FUROS	296	
MM-500.56.20	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 20 FUROS	348	
MM-500.56.22	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 22 FUROS	374	
MM-500.56.24	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 24 FUROS	400	
MM-500.56.26	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 26 FUROS	426	
MM-500.56.28	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 28 FUROS	452	
MM-500.56.30	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 30 FUROS	478	
MM-500.56.32	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LE 32 FUROS	504	
MM-500.57.02	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 02 FUROS	88	
MM-500.57.04	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 04 FUROS	114	
MM-500.57.06	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 06 FUROS	140	
MM-500.57.08	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 08 FUROS	166	
MM-500.57.10	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 10 FUROS	192	
MM-500.57.12	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 12 FUROS	218	
MM-500.57.14	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 14 FUROS	244	
MM-500.57.16	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 16 FUROS	270	
MM-500.57.18	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 18 FUROS	296	
MM-500.57.20	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 20 FUROS	348	
MM-500.57.22	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 22 FUROS	374	
MM-500.57.24	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 24 FUROS	400	
MM-500.57.26	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 26 FUROS	426	
MM-500.57.28	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 28 FUROS	452	



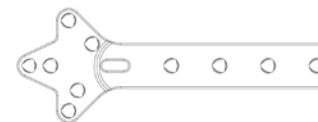
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.57.30	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 30 FUROS	478	
MM-500.57.32	PLACA FEMORAL DISTAL MEDPLATE LATERAL BLOQUEADA LD 32 FUROS	504	
MM-500.58.03	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 03 FUROS	78	
MM-500.58.04	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 04 FUROS	95	
MM-500.58.05	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 05 FUROS	112	
MM-500.58.06	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 06 FUROS	129	
MM-500.58.07	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 07 FUROS	146	
MM-500.58.08	PLACA MEDIAL MEDPLATE P/ TÍBIA 08 FUROS	163	
MM-500.59.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LE 07 FUROS	165	
MM-500.59.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LE 11 FUROS	229	
MM-500.59.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LE 15 FUROS	293	
MM-500.60.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LD 07 FUROS	165	
MM-500.60.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LD 11 FUROS	229	
MM-500.60.08	PLACA P/ TIBIA PROXIMAL MEDPLATE C/ BLOQUEIO LD 15 FUROS	293	
MM-500.61.05	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LE 05 FUROS	88	
MM-500.61.07	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LE 07 FUROS	120	
MM-500.61.09	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LE 09 FUROS	152	
MM-500.61.11	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LE 11 FUROS	184	
MM-500.62.05	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LD 05 FUROS	88	
MM-500.62.07	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LD 07 FUROS	120	
MM-500.62.09	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LD 09 FUROS	152	
MM-500.62.11	PLACA LATERAL MEDPLATE DE SUPORTE P/ TÍBIA LD 11 FUROS	184	
MM-500.63.01	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 01 FURO	14,5	
MM-500.63.02	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 02 FUROS	26	
MM-500.63.03	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 03 FUROS	37,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.63.04	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 04 FUROS	49
MM-500.63.05	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 05 FUROS	60,5
MM-500.63.06	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 06 FUROS	72
MM-500.63.07	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 07 FUROS	83,5
MM-500.63.08	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 08 FUROS	95
MM-500.63.09	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 09 FUROS	106,5
MM-500.63.10	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 10 FUROS	118
MM-500.63.11	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 11 FUROS	129,5
MM-500.63.12	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 12 FUROS	141
MM-500.63.13	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 13 FUROS	152,5
MM-500.63.14	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 14 FUROS	164
MM-500.64.01	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 01 FURO	56
MM-500.64.02	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 02 FUROS	72
MM-500.64.03	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 03 FUROS	88
MM-500.64.04	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 04 FUROS	104
MM-500.64.05	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 05 FUROS	120
MM-500.64.06	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 06 FUROS	136
MM-500.64.07	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 07 FUROS	152
MM-500.64.08	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 08 FUROS	168
MM-500.64.09	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 09 FUROS	184
MM-500.64.10	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 10 FUROS	200
MM-500.64.11	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 11 FUROS	216
MM-500.64.12	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 12 FUROS	232
MM-500.64.13	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 13 FUROS	248
MM-500.64.14	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 14 FUROS	264
MM-500.65.03	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 03 FUROS	30
MM-500.65.04	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 04 FUROS	38
MM-500.65.05	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 05 FUROS	46
MM-500.65.06	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 06 FUROS	54
MM-500.65.07	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 07 FUROS	62





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.65.08	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 08 FUROS	70
MM-500.65.09	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 09 FUROS	78
MM-500.65.10	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 10 FUROS	86
MM-500.65.11	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 11 FUROS	94
MM-500.65.12	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 12 FUROS	102
MM-500.65.13	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 13 FUROS	110
MM-500.65.14	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 14 FUROS	118
MM-500.65.15	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 15 FUROS	126
MM-500.65.16	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 16 FUROS	134
MM-500.65.18	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 18 FUROS	150
MM-500.65.20	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 20 FUROS	166
MM-500.66.01	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 01 FURO	23,5
MM-500.66.02	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 02 FUROS	35
MM-500.66.03	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 03 FUROS	46,5
MM-500.66.04	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 04 FUROS	58
MM-500.66.05	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 05 FUROS	60,5
MM-500.66.06	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 06 FUROS	69,5
MM-500.66.07	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 07 FUROS	81
MM-500.66.08	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 08 FUROS	92,5
MM-500.66.09	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 09 FUROS	104
MM-500.66.10	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 10 FUROS	115,5
MM-500.66.11	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 11 FUROS	127
MM-500.66.12	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 12 FUROS	138,5
MM-500.66.13	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 13 FUROS	150
MM-500.66.14	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 14 FUROS	161,5
MM-500.67.01	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LE 01 FURO	16
MM-500.67.02	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LE 02 FUROS	27,5
MM-500.67.03	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LE 03 FUROS	39
MM-500.67.04	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LE 04 FUROS	50,5
MM-500.67.05	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LE 05 FUROS	62





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.67.06	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 06 FUROS	73
MM-500.67.07	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 07 FUROS	85
MM-500.67.08	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 08 FUROS	96,5
MM-500.67.09	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 09 FUROS	108
MM-500.67.10	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 10 FUROS	119,5
MM-500.67.11	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 11 FUROS	131
MM-500.67.12	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 12 FUROS	142,5
MM-500.67.13	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 13 FUROS	154
MM-500.67.14	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LE 14 FUROS	165,5
MM-500.68.01	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 01 FURO	16
MM-500.68.02	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 02 FUROS	27,5
MM-500.68.03	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 03 FUROS	39
MM-500.68.04	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 04 FUROS	50,5
MM-500.68.05	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 05 FUROS	62
MM-500.68.06	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 06 FUROS	73
MM-500.68.07	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 07 FUROS	85
MM-500.68.08	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 08 FUROS	96,5
MM-500.68.09	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 09 FUROS	108
MM-500.68.10	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 10 FUROS	119,5
MM-500.68.11	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 11 FUROS	131
MM-500.68.12	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 12 FUROS	142,5
MM-500.68.13	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 13 FUROS	154
MM-500.68.14	PLACA L MADPLATE PARA UERO RETA LD 14 FUROS	165,5
MM-500.69.01	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 01 FURO	19
MM-500.69.02	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 02 FUROS	30,5
MM-500.69.03	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 03 FUROS	42
MM-500.69.04	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 04 FUROS	53,5
MM-500.69.05	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 05 FUROS	65
MM-500.69.06	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 06 FUROS	76,5
MM-500.69.07	PLACA L MADPLATE PARA UERO LE 07 FUROS	88





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.69.08	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 08 FUIROS	99,5
MM-500.69.09	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 09 FUIROS	111
MM-500.69.10	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 10 FUIROS	122,5
MM-500.69.11	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 11 FUIROS	134
MM-500.69.12	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 12 FUIROS	145,5
MM-500.69.13	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 13 FUIROS	157
MM-500.69.14	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 14 FUIROS	168,5
MM-500.70.01	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 01 FUIRO	19
MM-500.70.02	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 02 FUIROS	30,5
MM-500.70.03	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 03 FUIROS	42
MM-500.70.04	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 04 FUIROS	53,5
MM-500.70.05	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 05 FUIROS	65
MM-500.70.06	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 06 FUIROS	76,5
MM-500.70.07	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 07 FUIROS	88
MM-500.70.08	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 08 FUIROS	99,5
MM-500.70.09	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 09 FUIROS	111
MM-500.70.10	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 10 FUIROS	122,5
MM-500.70.11	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 11 FUIROS	134
MM-500.70.12	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 12 FUIROS	145,5
MM-500.70.13	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 13 FUIROS	157
MM-500.70.14	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 14 FUIROS	168,5
MM-500.71.03	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 03 FUIROS	39
MM-500.71.04	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 04 FUIROS	50
MM-500.71.05	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 05 FUIROS	61
MM-500.71.06	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 06 FUIROS	72
MM-500.71.07	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 07 FUIROS	83
MM-500.71.08	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 08 FUIROS	94
MM-500.71.09	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 09 FUIROS	105
MM-500.71.10	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 10 FUIROS	116
MM-500.71.11	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 11 FUIROS	127





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.71.12	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 12 FUROS	138
MM-500.71.13	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 13 FUROS	149
MM-500.71.14	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 14 FUROS	160
MM-500.71.15	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 15 FUROS	171
MM-500.71.16	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 16 FUROS	182
MM-500.71.18	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 18 FUROS	204
MM-500.71.20	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 20 FUROS	226
MM-500.72.03	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 03 FUROS	39
MM-500.72.04	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 04 FUROS	50
MM-500.72.05	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 05 FUROS	61
MM-500.72.06	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 06 FUROS	72
MM-500.72.07	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 07 FUROS	83
MM-500.72.08	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 08 FUROS	94
MM-500.72.09	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 09 FUROS	105
MM-500.72.10	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 10 FUROS	116
MM-500.72.11	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 11 FUROS	127
MM-500.72.12	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 12 FUROS	138
MM-500.72.13	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 13 FUROS	149
MM-500.72.14	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 14 FUROS	160
MM-500.72.15	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 15 FUROS	171
MM-500.72.16	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 16 FUROS	182
MM-500.72.18	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 18 FUROS	204
MM-500.72.20	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 20 FUROS	226
MM-500.73.02	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 02 FUROS	87,5
MM-500.73.04	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 04 FUROS	102
MM-500.73.06	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 06 FUROS	116,5
MM-500.73.08	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 08 FUROS	131
MM-500.73.10	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 10 FUROS	145,5
MM-500.73.12	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 12 FUROS	160
MM-500.73.14	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 14 FUROS	174,5



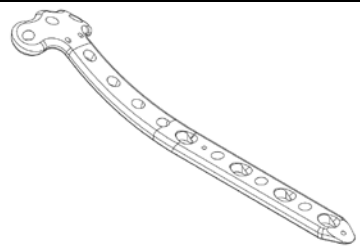


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.74.04	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 04 FUROS	136	
MM-500.74.06	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 06 FUROS	172	
MM-500.74.08	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 08 FUROS	208	
MM-500.74.10	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 10 FUROS	244	
MM-500.74.12	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 12 FUROS	280	
MM-500.74.14	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 14 FUROS	316	
MM-500.74.16	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 16 FUROS	352	
MM-500.74.18	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 18 FUROS	388	
MM-500.74.20	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LE 20 FUROS	424	
MM-500.75.04	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 04 FUROS	136	
MM-500.75.06	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 06 FUROS	172	
MM-500.75.08	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 08 FUROS	208	
MM-500.75.10	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 10 FUROS	244	
MM-500.75.12	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 12 FUROS	280	
MM-500.75.14	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 14 FUROS	316	
MM-500.75.16	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 16 FUROS	352	
MM-500.75.18	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 18 FUROS	388	
MM-500.75.20	PLACA CONDILAR MADPLATE BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL LD 20 FUROS	424	
MM-500.76.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 04 FUROS	106	
MM-500.76.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 06 FUROS	126	
MM-500.76.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 08 FUROS	146	
MM-500.76.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 10 FUROS	166	
MM-500.76.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 12 FUROS	186	
MM-500.76.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 14 FUROS	206	
MM-500.76.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LE 16 FUROS	226	
MM-500.77.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 04 FUROS	106	
MM-500.77.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 06 FUROS	126	
MM-500.77.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 08 FUROS	146	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.77.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 10 FUROS	166	
MM-500.77.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 12 FUROS	186	
MM-500.77.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 14 FUROS	206	
MM-500.77.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCP LD 16 FUROS	226	
MM-500.78.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 04 FUROS	106	
MM-500.78.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 06 FUROS	126	
MM-500.78.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 08 FUROS	146	
MM-500.78.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 10 FUROS	166	
MM-500.78.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 12 FUROS	186	
MM-500.78.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 14 FUROS	206	
MM-500.78.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LE 16 FUROS	226	
MM-500.79.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 04 FUROS	106	
MM-500.79.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 06 FUROS	126	
MM-500.79.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 08 FUROS	146	
MM-500.79.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 10 FUROS	166	
MM-500.79.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 12 FUROS	186	
MM-500.79.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 14 FUROS	206	
MM-500.79.16	PLACA TIBIAL PROXIMAL LATERAL MEDPLATE BLOQUEADA PCG LD 16 FUROS	226	
MM-500.80.02	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 02 FUROS	98	
MM-500.80.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 04 FUROS	118	
MM-500.80.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 06 FUROS	138	
MM-500.80.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 08 FUROS	158	
MM-500.80.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 10 FUROS	178	
MM-500.80.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 12 FUROS	198	
MM-500.80.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LE 14 FUROS	218	
MM-500.81.02	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 02 FUROS	98	
MM-500.81.04	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 04 FUROS	118	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.81.06	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 06 FUROS	138	
MM-500.81.08	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 08 FUROS	158	
MM-500.81.10	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 10 FUROS	178	
MM-500.81.12	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 12 FUROS	198	
MM-500.81.14	PLACA TIBIAL PROXIMAL MEDIAL MEDPLATE BLOQUEADA LD 14 FUROS	218	
MM-500.82.01	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 01 FURO	14,5	
MM-500.82.02	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 02 FUROS	26	
MM-500.82.03	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 03 FUROS	37,5	
MM-500.82.04	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 04 FUROS	49	
MM-500.82.05	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 05 FUROS	60,5	
MM-500.82.06	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 06 FUROS	72	
MM-500.82.07	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 07 FUROS	83,5	
MM-500.82.08	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 08 FUROS	95	
MM-500.82.09	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 09 FUROS	106,5	
MM-500.82.10	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 10 FUROS	118	
MM-500.82.11	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 11 FUROS	129,5	
MM-500.82.12	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 12 FUROS	141	
MM-500.82.13	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 13 FUROS	152,5	
MM-500.82.14	PLACA RETA 3,5 MADPLATE BLOQUEADA BAIXO PERFIL 14 FUROS	164	
MM-500.83.01	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 01 FURO	56	
MM-500.83.02	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 02 FUROS	72	
MM-500.83.03	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 03 FUROS	88	
MM-500.83.04	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 04 FUROS	104	
MM-500.83.05	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 05 FUROS	120	
MM-500.83.06	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 06 FUROS	136	
MM-500.83.07	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 07 FUROS	152	
MM-500.83.08	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 08 FUROS	168	
MM-500.83.09	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 09 FUROS	184	
MM-500.83.10	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 10 FUROS	200	
MM-500.83.11	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 11 FUROS	216	

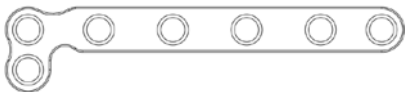


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.83.12	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 12 FUROS	232	
MM-500.83.13	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 13 FUROS	248	
MM-500.83.14	PLACA TREVO MADPLATE BLOQUEADA PARA PLATO TIBIAL 14 FUROS	264	
MM-500.84.03	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 03 FUROS	30	
MM-500.84.04	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 04 FUROS	38	
MM-500.84.05	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 05 FUROS	46	
MM-500.84.06	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 06 FUROS	54	
MM-500.84.07	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 07 FUROS	62	
MM-500.84.08	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 08 FUROS	70	
MM-500.84.09	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 09 FUROS	78	
MM-500.84.10	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 10 FUROS	86	
MM-500.84.11	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 11 FUROS	94	
MM-500.84.12	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 12 FUROS	102	
MM-500.84.13	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 13 FUROS	110	
MM-500.84.14	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 14 FUROS	118	
MM-500.84.15	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 15 FUROS	126	
MM-500.84.16	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 16 FUROS	134	
MM-500.84.18	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 18 FUROS	142	
MM-500.84.20	PLACA RETA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO 20 FUROS	150	
MM-500.85.01	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 01 FURO	23,5	
MM-500.85.02	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 02 FUROS	35	
MM-500.85.03	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 03 FUROS	46,5	
MM-500.85.04	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 04 FUROS	58	
MM-500.85.05	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 05 FUROS	60,5	
MM-500.85.06	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 06 FUROS	69,5	
MM-500.85.07	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 07 FUROS	81	
MM-500.85.08	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 08 FUROS	92,5	
MM-500.85.09	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 09 FUROS	104	
MM-500.85.10	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 10 FUROS	115,5	
MM-500.85.11	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 11 FUROS	127	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.85.12	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 12 FUROS	138,5	
MM-500.85.13	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 13 FUROS	150	
MM-500.85.14	PLACA 1/3 TUBO MADPLATE BLOQUEADA 14 FUROS	161,5	
MM-500.86.01	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 01 FURO	16	
MM-500.86.02	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 02 FUROS	27,5	
MM-500.86.03	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 03 FUROS	39	
MM-500.86.04	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 04 FUROS	50,5	
MM-500.86.05	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 05 FUROS	62	
MM-500.86.06	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 06 FUROS	73	
MM-500.86.07	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 07 FUROS	85	
MM-500.86.08	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 08 FUROS	96,5	
MM-500.86.09	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 09 FUROS	108	
MM-500.86.10	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 10 FUROS	119,5	
MM-500.86.11	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 11 FUROS	131	
MM-500.86.12	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 12 FUROS	142,5	
MM-500.86.13	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 13 FUROS	154	
MM-500.86.14	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LE 14 FUROS	165,5	
MM-500.87.01	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 01 FURO	16	
MM-500.87.02	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 02 FUROS	27,5	
MM-500.87.03	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 03 FUROS	39	
MM-500.87.04	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 04 FUROS	50,5	
MM-500.87.05	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 05 FUROS	62	
MM-500.87.06	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 06 FUROS	73	
MM-500.87.07	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 07 FUROS	85	
MM-500.87.08	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 08 FUROS	96,5	
MM-500.87.09	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 09 FUROS	108	
MM-500.87.10	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 10 FUROS	119,5	
MM-500.87.11	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 11 FUROS	131	
MM-500.87.12	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 12 FUROS	142,5	
MM-500.87.13	PLACA L MADPLATE PARA UMIRO RETA LD 13 FUROS	154	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.87.14	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS RETA LD 14 FUIROS	165,5	
MM-500.88.01	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 01 FUIRO	19	
MM-500.88.02	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 02 FUIROS	30,5	
MM-500.88.03	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 03 FUIROS	42	
MM-500.88.04	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 04 FUIROS	53,5	
MM-500.88.05	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 05 FUIROS	65	
MM-500.88.06	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 06 FUIROS	76,5	
MM-500.88.07	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 07 FUIROS	88	
MM-500.88.08	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 08 FUIROS	99,5	
MM-500.88.09	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 09 FUIROS	111	
MM-500.88.10	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 10 FUIROS	122,5	
MM-500.88.11	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 11 FUIROS	134	
MM-500.88.12	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 12 FUIROS	145,5	
MM-500.88.13	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 13 FUIROS	157	
MM-500.88.14	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LE 14 FUIROS	168,5	
MM-500.89.01	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 01 FUIRO	19	
MM-500.89.02	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 02 FUIROS	30,5	
MM-500.89.03	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 03 FUIROS	42	
MM-500.89.04	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 04 FUIROS	53,5	
MM-500.89.05	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 05 FUIROS	65	
MM-500.89.06	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 06 FUIROS	76,5	
MM-500.89.07	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 07 FUIROS	88	
MM-500.89.08	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 08 FUIROS	99,5	
MM-500.89.09	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 09 FUIROS	111	
MM-500.89.10	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 10 FUIROS	122,5	
MM-500.89.11	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 11 FUIROS	134	
MM-500.89.12	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 12 FUIROS	145,5	
MM-500.89.13	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 13 FUIROS	157	
MM-500.89.14	PLACA L MADPLATE PARA UMEROS LD 14 FUIROS	168,5	

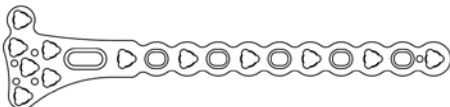


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.90.03	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 03 FUROS	39	
MM-500.90.04	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 04 FUROS	50	
MM-500.90.05	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 05 FUROS	61	
MM-500.90.06	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 06 FUROS	72	
MM-500.90.07	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 07 FUROS	83	
MM-500.90.08	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 08 FUROS	94	
MM-500.90.09	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 09 FUROS	105	
MM-500.90.10	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 10 FUROS	116	
MM-500.90.11	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 11 FUROS	127	
MM-500.90.12	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 12 FUROS	138	
MM-500.90.13	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 13 FUROS	149	
MM-500.90.14	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 14 FUROS	160	
MM-500.90.15	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 15 FUROS	171	
MM-500.90.16	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 16 FUROS	182	
MM-500.90.18	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 18 FUROS	204	
MM-500.90.20	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R108 20 FUROS	226	
MM-500.91.03	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 03 FUROS	39	
MM-500.91.04	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 04 FUROS	50	
MM-500.91.05	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 05 FUROS	61	
MM-500.91.06	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 06 FUROS	72	
MM-500.91.07	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 07 FUROS	83	
MM-500.91.08	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 08 FUROS	94	
MM-500.91.09	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 09 FUROS	105	
MM-500.91.10	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 10 FUROS	116	
MM-500.91.11	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 11 FUROS	127	
MM-500.91.12	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 12 FUROS	138	
MM-500.91.13	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 13 FUROS	149	
MM-500.91.14	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 14 FUROS	160	
MM-500.91.15	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 15 FUROS	171	
MM-500.91.16	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 16 FUROS	182	
MM-500.91.18	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 18 FUROS	204	

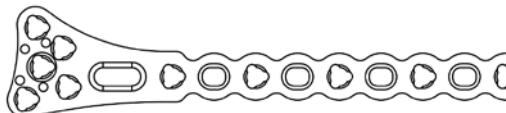
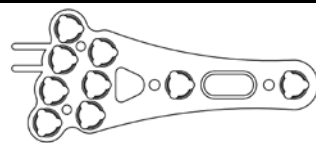


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.91.20	PLACA CURVA MADPLATE DE RECONSTRUÇÃO R88 20 FUROS	226	
MM-500.92.02	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 02 FUROS	87,5	
MM-500.92.04	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 04 FUROS	102	
MM-500.92.06	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 06 FUROS	116,5	
MM-500.92.08	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 08 FUROS	131	
MM-500.92.10	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 10 FUROS	145,5	
MM-500.92.12	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 12 FUROS	160	
MM-500.92.14	PLACA MEDPLATE PARA ARTRODESE DE PUNHO 14 FUROS	174,5	
MM-500.93.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.93.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.93.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.93.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.93.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (COM ABA)	76	
MM-500.93.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.93.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.93.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.93.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.93.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (COM ABA)	116	
MM-500.93.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.94.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (COM ABA)	44	
MM-500.94.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (COM ABA)	52	
MM-500.94.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (COM ABA)	60	
MM-500.94.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (COM ABA)	68	
MM-500.94.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (COM ABA)	76	
MM-500.94.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (COM ABA)	84	
MM-500.94.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (COM ABA)	92	
MM-500.94.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (COM ABA)	100	
MM-500.94.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (COM ABA)	108	
MM-500.94.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (COM ABA)	116	

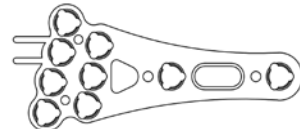
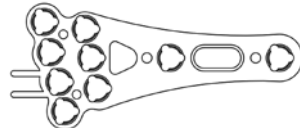
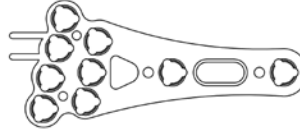
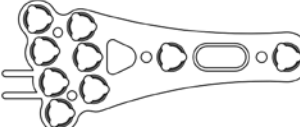


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.94.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (COM ABA)	124	
MM-500.95.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 02 FUROS (SEM ABA)	44	
MM-500.95.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 03 FUROS (SEM ABA)	52	
MM-500.95.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 04 FUROS (SEM ABA)	60	
MM-500.95.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 05 FUROS (SEM ABA)	68	
MM-500.95.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 06 FUROS (SEM ABA)	76	
MM-500.95.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 07 FUROS (SEM ABA)	84	
MM-500.95.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 08 FUROS (SEM ABA)	92	
MM-500.95.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 09 FUROS (SEM ABA)	100	
MM-500.95.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 10 FUROS (SEM ABA)	108	
MM-500.95.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 11 FUROS (SEM ABA)	116	
MM-500.95.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA 12 FUROS (SEM ABA)	124	
MM-500.96.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 02 FUROS (SEM ABA)	44	
MM-500.96.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 03 FUROS (SEM ABA)	52	
MM-500.96.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 04 FUROS (SEM ABA)	60	
MM-500.96.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 05 FUROS (SEM ABA)	68	
MM-500.96.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 06 FUROS (SEM ABA)	76	
MM-500.96.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 07 FUROS (SEM ABA)	84	
MM-500.96.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 08 FUROS (SEM ABA)	92	
MM-500.96.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 09 FUROS (SEM ABA)	100	
MM-500.96.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 10 FUROS (SEM ABA)	108	
MM-500.96.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 11 FUROS (SEM ABA)	116	
MM-500.96.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA 12 FUROS (SEM ABA)	124	
MM-500.97.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	47	
MM-500.97.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.97.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.97.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.98.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA C/ GARRA 02 FUROS	47	

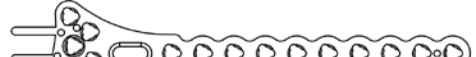


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.98.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.98.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.98.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.99.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	47	
MM-500.99.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.99.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.99.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA DIREITA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.100.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA C/ GARRA 02 FUROS	47	
MM-500.100.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.100.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.100.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA MÉDIA ESQUERDA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.101.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	47	
MM-500.101.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIREITA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.101.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIREITA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.101.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE DIREITA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.102.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA C/ GARRA 02 FUROS	47	
MM-500.102.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA C/ GARRA 03 FUROS	56	
MM-500.102.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA C/ GARRA 04 FUROS	70	
MM-500.102.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA GRANDE ESQUERDA C/ GARRA 05 FUROS	100	
MM-500.103.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 02 FUROS	44	
MM-500.103.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 03 FUROS	52	
MM-500.103.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 04 FUROS	60	
MM-500.103.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 05 FUROS	68	
MM-500.103.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 06 FUROS	76	
MM-500.103.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 07 FUROS	84	



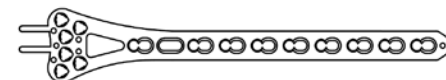
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.103.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 08 FUROS	92	
MM-500.103.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 09 FUROS	100	
MM-500.103.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 10 FUROS	108	
MM-500.103.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 11 FUROS	116	
MM-500.103.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (COM ABA E GARRA) 12 FUROS	124	
MM-500.104.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 02 FUROS	44	
MM-500.104.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 03 FUROS	52	
MM-500.104.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 04 FUROS	60	
MM-500.104.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 05 FUROS	68	
MM-500.104.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 06 FUROS	76	
MM-500.104.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 07 FUROS	84	
MM-500.104.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 08 FUROS	92	
MM-500.104.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 09 FUROS	100	
MM-500.104.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 10 FUROS	108	
MM-500.104.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 11 FUROS	116	
MM-500.104.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (COM ABA E GARRA) 12 FUROS	124	
MM-500.105.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 02 FUROS	44	
MM-500.105.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 03 FUROS	52	
MM-500.105.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 04 FUROS	60	
MM-500.105.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 05 FUROS	68	
MM-500.105.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 06 FUROS	76	
MM-500.105.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 07 FUROS	84	
MM-500.105.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 08 FUROS	92	
MM-500.105.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 09 FUROS	100	
MM-500.105.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 10 FUROS	108	
MM-500.105.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 11 FUROS	116	
MM-500.105.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA DIREITA (SEM ABA COM GARRA) 12 FUROS	124	
MM-500.106.02	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 02 FUROS	44	
MM-500.106.03	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 03 FUROS	52	



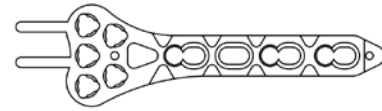
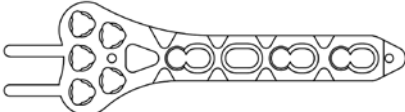
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.106.04	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 04 FUROS	60
MM-500.106.05	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 05 FUROS	68
MM-500.106.06	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 06 FUROS	76
MM-500.106.07	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 07 FUROS	84
MM-500.106.08	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 08 FUROS	92
MM-500.106.09	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 09 FUROS	100
MM-500.106.10	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 10 FUROS	108
MM-500.106.11	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 11 FUROS	116
MM-500.106.12	PLACA MEDPLATE VOLAR NEWFIST ÂNGULADA ESQUERDA (SEM ABA COM GARRA) 12 FUROS	124
MM-500.107.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 01 FURO	62,5
MM-500.107.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 02 FUROS	73,5
MM-500.107.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 03 FUROS	84,5
MM-500.107.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 04 FUROS	95,5
MM-500.107.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 05 FUROS	106,5
MM-500.107.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 06 FUROS	117,5
MM-500.107.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 07 FUROS	128,5
MM-500.107.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 08 FUROS	139,5
MM-500.107.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 09 FUROS	150,5
MM-500.107.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 10 FUROS	161,5
MM-500.107.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 11 FUROS	172,5
MM-500.107.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 12 FUROS	183,5
MM-500.108.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 01 FURO	62,5
MM-500.108.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	73,5
MM-500.108.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 03 FUROS	84,5
MM-500.108.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 04 FUROS	95,5
MM-500.108.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 05 FUROS	106,5
MM-500.108.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 06 FUROS	117,5
MM-500.108.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 07 FUROS	128,5
MM-500.108.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 08 FUROS	139,5
MM-500.108.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 09 FUROS	150,5





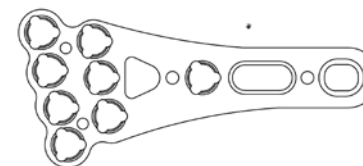
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.108.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 10 FUROS	161,5	
MM-500.108.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 11 FUROS	172,5	
MM-500.108.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 12 FUROS	183,5	
MM-500.109.01	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 01 FURO	51,5	
MM-500.109.02	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	62,5	
MM-500.109.03	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 03 FUROS	73,5	
MM-500.109.04	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 04 FUROS	84,5	
MM-500.109.05	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 05 FUROS	95,5	
MM-500.109.06	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 06 FUROS	106,5	
MM-500.109.07	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 07 FUROS	117,5	
MM-500.109.08	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 08 FUROS	128,5	
MM-500.109.09	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 09 FUROS	139,5	
MM-500.109.10	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 10 FUROS	150,5	
MM-500.109.11	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 11 FUROS	161,5	
MM-500.109.12	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 12 FUROS	172,5	
MM-500.110.01	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 01 FUROS	51,5	
MM-500.110.02	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 02 FUROS	62,5	
MM-500.110.03	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 03 FUROS	73,5	
MM-500.110.04	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 04 FUROS	84,5	
MM-500.110.05	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 05 FUROS	95,5	
MM-500.110.06	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 06 FUROS	106,5	
MM-500.110.07	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 07 FUROS	117,5	
MM-500.110.08	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 08 FUROS	128,5	
MM-500.110.09	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 09 FUROS	139,5	
MM-500.110.10	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 10 FUROS	150,5	
MM-500.110.11	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 11 FUROS	161,5	
MM-500.110.12	PLACA MEDPLATE RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA C/ GARRA 12 FUROS	172,5	
MM-500.111.01	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 01 FURO	48	
MM-500.111.02	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA C/ GARRA 02 FUROS	58	



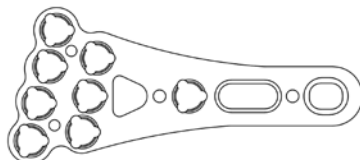
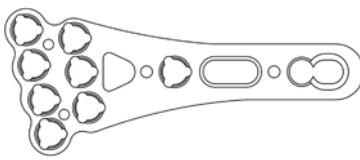
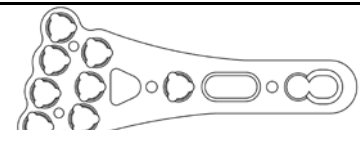
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.111.03	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 03 Furos	68
MM-500.111.04	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 04 Furos	78
MM-500.111.05	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 05 Furos	88
MM-500.111.06	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 06 Furos	98
MM-500.111.07	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 07 Furos	108
MM-500.111.08	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 08 Furos	118
MM-500.111.09	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 09 Furos	128
MM-500.111.10	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 10 Furos	138
MM-500.111.11	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 11 Furos	148
MM-500.111.12	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Direita C/ Garra 12 Furos	158
MM-500.112.01	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 01 Furo	48
MM-500.112.02	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 02 Furos	58
MM-500.112.03	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 03 Furos	68
MM-500.112.04	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 04 Furos	78
MM-500.112.05	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 05 Furos	88
MM-500.112.06	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 06 Furos	98
MM-500.112.07	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 07 Furos	108
MM-500.112.08	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 08 Furos	118
MM-500.112.09	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 09 Furos	128
MM-500.112.10	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 10 Furos	138
MM-500.112.11	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 11 Furos	148
MM-500.112.12	PLACA MEDPLATE ULNA Volar Bloqueada Esquerda C/ Garra 12 Furos	158
MM-500.113.02	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 02 Furos	48
MM-500.113.03	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 03 Furos	56
MM-500.113.04	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 04 Furos	66
MM-500.113.05	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 05 Furos	74
MM-500.113.06	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 06 Furos	84
MM-500.113.07	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 07 Furos	92
MM-500.113.08	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 08 Furos	102
MM-500.113.09	PLACA MEDPLATE Volar FIST Ângulada Pequena Esquerda 09 Furos	110





Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.113.10	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 10 FUROS	120	
MM-500.113.11	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 11 FUROS	128	
MM-500.113.12	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 12 FUROS	138	
MM-500.114.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 02 FUROS	48	
MM-500.114.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 03 FUROS	56	
MM-500.114.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 04 FUROS	66	
MM-500.114.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 05 FUROS	74	
MM-500.114.06	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 06 FUROS	84	
MM-500.114.07	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 07 FUROS	92	
MM-500.114.08	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 08 FUROS	102	
MM-500.114.09	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 09 FUROS	110	
MM-500.114.10	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 10 FUROS	120	
MM-500.114.11	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 11 FUROS	128	
MM-500.114.12	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 12 FUROS	138	
MM-500.115.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 02 FUROS	52	
MM-500.115.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 03 FUROS	64	
MM-500.115.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 04 FUROS	76	
MM-500.115.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 05 FUROS	88	
MM-500.115.06	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 06 FUROS	100	
MM-500.115.07	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 07 FUROS	112	
MM-500.115.08	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 08 FUROS	124	
MM-500.115.09	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 09 FUROS	136	
MM-500.115.10	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 10 FUROS	148	
MM-500.115.11	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 11 FUROS	160	
MM-500.115.12	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA ESQUERDA 12 FUROS	172	
MM-500.116.02	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 02 FUROS	52	
MM-500.116.03	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 03 FUROS	64	
MM-500.116.04	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 04 FUROS	76	
MM-500.116.05	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 05 FUROS	88	



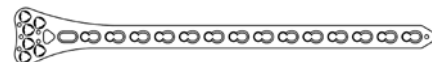
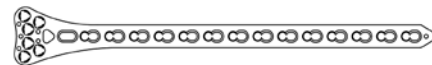
Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.116.06	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 06 FUROS	100
MM-500.116.07	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 07 FUROS	112
MM-500.116.08	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 08 FUROS	124
MM-500.116.09	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 09 FUROS	136
MM-500.116.10	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 10 FUROS	148
MM-500.116.11	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 11 FUROS	160
MM-500.116.12	PLACA MEDPLATE VOLAR FIST ÂNGULADA PEQUENA DIREITA 12 FUROS	172
MM-500.117.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FUROS	44
MM-500.117.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	52
MM-500.117.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	60
MM-500.117.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	68
MM-500.117.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	76
MM-500.117.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	84
MM-500.117.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	92
MM-500.117.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	100
MM-500.117.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	108
MM-500.117.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	116
MM-500.117.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	124
MM-500.117.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	132
MM-500.117.13	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 13 FUROS	140
MM-500.117.14	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 14 FUROS	148
MM-500.118.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	44
MM-500.118.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	52
MM-500.118.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	60
MM-500.118.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	68
MM-500.118.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	76
MM-500.118.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	84
MM-500.118.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	92
MM-500.118.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	100
MM-500.118.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	108



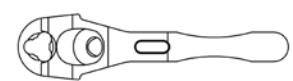
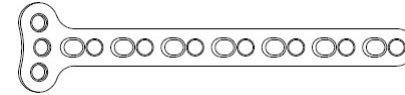


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.118.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 10 FUIROS	116	
MM-500.118.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 11 FUIROS	124	
MM-500.118.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 12 FUIROS	132	
MM-500.118.13	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 13 FUIROS	140	
MM-500.118.14	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 14 FUIROS	148	
MM-500.119.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 01 FUIRO	44	
MM-500.119.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUIROS	55	
MM-500.119.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUIROS	66	
MM-500.119.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUIROS	77	
MM-500.119.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUIROS	88	
MM-500.119.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUIROS	99	
MM-500.119.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUIROS	110	
MM-500.119.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUIROS	121	
MM-500.119.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUIROS	132	
MM-500.119.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUIROS	143	
MM-500.119.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUIROS	154	
MM-500.119.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUIROS	165	
MM-500.119.13	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 13 FUIROS	176	
MM-500.119.14	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 14 FUIROS	187	
			
MM-500.120.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 01 FUIROS	44	
MM-500.120.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 02 FUIROS	55	
MM-500.120.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 03 FUIROS	66	
MM-500.120.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 04 FUIROS	77	
MM-500.120.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 05 FUIROS	88	
MM-500.120.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 06 FUIROS	99	
MM-500.120.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 07 FUIROS	110	
MM-500.120.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 08 FUIROS	121	
MM-500.120.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 09 FUIROS	132	
MM-500.120.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 10 FUIROS	143	
MM-500.120.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 11 FUIROS	154	

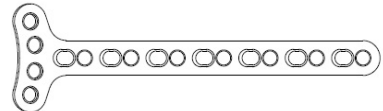
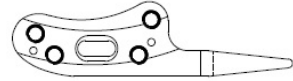
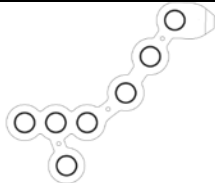


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.120.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	165	
MM-500.120.13	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 13 FUROS	176	
MM-500.120.14	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 14 FUROS	187	
MM-500.121.22	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 3,5 X 22MM	22	
MM-500.121.28	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 3,5 X 28MM	28	
MM-500.121.38	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 3,5 X 38MM	38	
MM-500.121.48	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 3,5 X 48MM	48	
MM-500.121.58	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 3,5 X 58MM	58	
MM-500.122.22	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 4,5 X 22MM	22	
MM-500.122.28	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 4,5 X 28MM	28	
MM-500.122.38	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 4,5 X 38MM	38	
MM-500.122.48	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 4,5 X 48MM	48	
MM-500.122.58	PLACA HALLUX VALGUS PERCUTANIO MEDPLATE 4,5 X 58MM	58	
MM-522.04	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 04 FUROS	111	
MM-522.05	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 05 FUROS	127	
MM-522.06	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 06 FUROS	143	
MM-522.07	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 07 FUROS	159	
MM-522.08	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 08 FUROS	175	
MM-522.09	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 09 FUROS	191	
MM-522.10	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 10 FUROS	207	
MM-522.11	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 11 FUROS	223	
MM-522.12	PLACA FÍBULA BLOQUEADA 12 FUROS	239	
MM-523.04	PLACA T 3F BLOQUEADA 04 FUROS	77	
MM-523.05	PLACA T 3F BLOQUEADA 05 FUROS	91,5	
MM-523.06	PLACA T 3F BLOQUEADA 06 FUROS	106	
MM-523.07	PLACA T 3F BLOQUEADA 07 FUROS	120,5	
MM-523.08	PLACA T 3F BLOQUEADA 08 FUROS	135	
MM-523.09	PLACA T 3F BLOQUEADA 09 FUROS	149,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-523.10	PLACA T 3F BLOQUEADA 10 FUROS	164	
MM-523.11	PLACA T 3F BLOQUEADA 11 FUROS	178,5	
MM-523.12	PLACA T 3F BLOQUEADA 12 FUROS	193	
MM-524.04	PLACA T 4F BLOQUEADA 04 FUROS	77	
MM-524.05	PLACA T 4F BLOQUEADA 05 FUROS	91,5	
MM-524.06	PLACA T 4F BLOQUEADA 06 FUROS	106	
MM-524.07	PLACA T 4F BLOQUEADA 07 FUROS	120,5	
MM-524.08	PLACA T 4F BLOQUEADA 08 FUROS	135	
MM-524.09	PLACA T 4F BLOQUEADA 09 FUROS	149,5	
MM-524.10	PLACA T 4F BLOQUEADA 10 FUROS	164	
MM-524.11	PLACA T 4F BLOQUEADA 11 FUROS	178,5	
MM-524.12	PLACA T 4F BLOQUEADA 12 FUROS	193	
MM-525.05	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	66,5	
MM-525.06	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	88	
MM-525.07	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	97	
MM-526.05	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	66,5	
MM-526.06	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	88	
MM-526.07	PLACA CLAVÍVULA C/ GANCHO DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	97	
MM-527.03	PLACA CALCÂNEO ANTERO LATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	40	
MM-528.04	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	131	
MM-528.05	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	147	
MM-528.06	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	163	

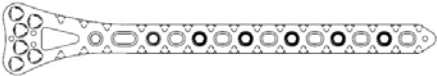


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-528.07	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	179	
MM-528.08	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	195	
MM-528.09	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	211	
MM-528.10	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	227	
MM-528.11	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 11 FUROS	243	
MM-528.12	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	259	
MM-528.13	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 13 FUROS	275	
MM-528.14	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 14 FUROS	291	
MM-528.15	PLACA DISTAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 15 FUROS	307	
MM-529.04	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	131	
MM-529.05	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	147	
MM-529.06	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	163	
MM-529.07	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	179	
MM-529.08	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	195	
MM-529.09	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	211	
MM-529.10	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	227	
MM-529.11	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	243	
MM-529.12	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	259	
MM-529.13	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 13 FUROS	275	
MM-529.14	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 14 FUROS	291	
MM-529.15	PLACA DISTAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 15 FUROS	307	
MM-530.03	PLACA CALCÂNEO ANTERO LATERAL DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	40	
MM-531.01	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	62,5	
MM-531.02	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	70,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-531.03	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	78,5	
MM-531.04	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	86,5	
MM-531.05	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	94,5	
MM-531.06	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	102,5	
MM-531.07	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	110,5	
MM-531.08	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	118,5	
MM-531.09	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	126,5	
MM-531.10	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	134,5	
MM-531.11	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	142,5	
MM-531.12	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	150,5	
MM-532.01	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	62,5	
MM-532.02	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	70,5	
MM-532.03	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	78,5	
MM-532.04	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	86,5	
MM-532.05	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	94,5	
MM-532.06	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	102,5	
MM-532.07	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	110,5	
MM-532.08	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	118,5	
MM-532.09	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	126,5	
MM-532.10	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	134,5	
MM-532.11	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 11 FUROS	142,5	
MM-532.12	PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	150,5	
MM-533.03	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	51	
MM-533.04	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	61	
MM-533.05	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	71	
MM-534.03	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	51	
MM-534.04	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	61	

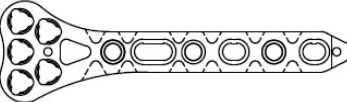


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-534.05	PLACA RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	71	
MM-535.02	PLACA DISTAL ULNA BLOQUEADA 02 FUROS	63	
MM-535.03	PLACA DISTAL ULNA BLOQUEADA 03 FUROS	73	
MM-535.04	PLACA DISTAL ULNA BLOQUEADA 04 FUROS	83	
MM-536.04	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	53,3	
MM-536.05	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	64,9	
MM-536.06	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	76,3	
MM-536.07	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	87,4	
MM-536.08	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	99,1	
MM-536.09	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	109	
MM-536.10	PLACA S CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	120,5	
MM-537.04	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	53,3	
MM-537.05	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	64,9	
MM-537.06	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	76,3	
MM-537.07	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	87,4	
MM-537.08	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	99,1	
MM-537.09	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	109	
MM-537.10	PLACA S CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	120,5	
MM-538.01	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	47,5	
MM-538.02	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	56,5	
MM-538.03	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	65,5	
MM-538.04	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	74,5	
MM-538.05	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	83,5	
MM-538.06	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	92,5	
MM-538.07	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	101,5	
MM-538.08	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	110,5	
MM-538.09	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	119,5	
MM-538.10	PLACA CLAVÍCULA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	128,5	

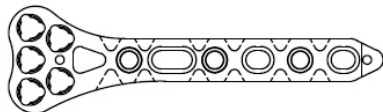


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-539.01	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	47,5	
MM-539.02	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	56,5	
MM-539.03	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	65,5	
MM-539.04	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	74,5	
MM-539.05	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	83,5	
MM-539.06	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	92,5	
MM-539.07	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	101,5	
MM-539.08	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	110,5	
MM-539.09	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	119,5	
MM-539.10	PLACA CLAVÍCULA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	128,5	
MM-540.05	PLACA CALCÂNEO ANTERO LATERAL MÉDIA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	56	
MM-541.05	PLACA CALCÂNEO ANTERO LATERAL MÉDIA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	56	
MM-542.01	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	46	
MM-542.02	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	54	
MM-542.03	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	62	
MM-542.04	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	70	
MM-542.05	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	78	
MM-542.06	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	86	
MM-542.07	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	94	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-542.08	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	102	
MM-542.09	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	110	
MM-542.10	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	118	
MM-542.11	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 11 FUROS	126	
MM-542.12	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	134	
MM-543.01	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	46	
MM-543.02	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	54	
MM-543.03	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	62	
MM-543.04	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	70	
MM-543.05	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	78	
MM-543.06	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	86	
MM-543.07	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	94	
MM-543.08	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	102	
MM-543.09	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	110	
MM-543.10	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	118	
MM-543.11	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	126	
MM-543.12	PLACA RADIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	134	
MM-544.04	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	63	
MM-544.06	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	93	
MM-544.08	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	123	
MM-544.10	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	153	
MM-544.12	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	183	
MM-544.13	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 13 FUROS	198	
MM-544.14	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 14 FUROS	212	
MM-544.15	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL DIREITA BLOQUEADA 15 FUROS	227	
MM-545.04	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	63	
MM-545.06	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	93	
MM-545.08	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	123	
MM-545.10	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	153	

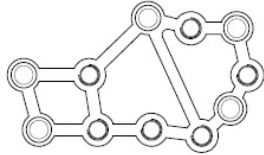
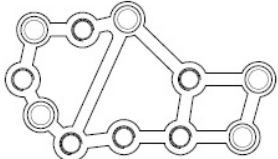
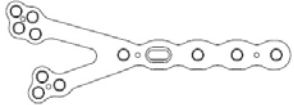


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-545.12	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	183	
MM-545.13	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 13 FUROS	198	
MM-545.14	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 14 FUROS	212	
MM-545.15	PLACA DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL ESQUERDA BLOQUEADA 15 FUROS	227	
MM-546.02	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 02 FUROS	91	
MM-546.03	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 03 FUROS	104	
MM-546.04	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 04 FUROS	117	
MM-546.05	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 05 FUROS	130	
MM-546.06	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 06 FUROS	143	
MM-546.07	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 07 FUROS	156	
MM-546.08	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 08 FUROS	169	
MM-546.09	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 09 FUROS	182	
MM-546.10	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 10 FUROS	195	
MM-546.11	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 11 FUROS	208	
MM-546.12	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 12 FUROS	221	
MM-546.13	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 13 FUROS	234	
MM-546.14	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 14 FUROS	247	
MM-546.15	PLACA PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 15 FUROS	260	
MM-547.01	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	48	
MM-547.02	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	58	
MM-547.03	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	68	
MM-547.04	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	78	
MM-547.05	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	88	
MM-547.06	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	98	
MM-547.07	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	108	
MM-547.08	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	118	
MM-547.09	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	128	
MM-547.10	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	138	
MM-547.11	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	148	
MM-547.12	PLACA ULNA VOLAR ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	158	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-548.01	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	48	
MM-548.02	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	58	
MM-548.03	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	68	
MM-548.04	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	78	
MM-548.05	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	88	
MM-548.06	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	98	
MM-548.07	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	108	
MM-548.08	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	118	
MM-548.09	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	128	
MM-548.10	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	138	
MM-548.11	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 11 FUROS	148	
MM-548.12	PLACA ULNA VOLAR DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	158	
MM-549.02	PLACA CALCÂNEO ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	57,5	
MM-550.02	PLACA CALCÂNEO DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	57,5	
MM-551.01	PLACA DORSAL EM "Y" ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	72,4	
MM-551.02	PLACA DORSAL EM "Y" ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	86,2	
MM-551.03	PLACA DORSAL EM "Y" ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	100	
MM-552.01	PLACA DORSAL EM "Y" DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	72,4	

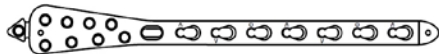
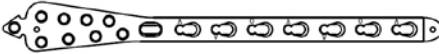


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-552.02	PLACA DORSAL EM "Y" DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	86,2	
MM-552.03	PLACA DORSAL EM "Y" DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	100	
MM-553.04	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	137	
MM-553.05	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	153	
MM-553.06	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	169	
MM-553.07	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	185	
MM-553.08	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	201	
MM-553.09	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	217	
MM-553.10	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	233	
MM-553.11	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 11 FUROS	249	
MM-553.12	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 12 FUROS	265	
MM-553.13	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 13 FUROS	281	
MM-553.14	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 14 FUROS	297	
MM-553.15	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA ESQUERDA BLOQUEADA 15 FUROS	313	
MM-554.04	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	137	
MM-554.05	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	153	
MM-554.06	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	169	
MM-554.07	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	185	
MM-554.08	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	201	
MM-554.09	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	217	
MM-554.10	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	233	
MM-554.11	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 11 FUROS	249	
MM-554.12	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 12 FUROS	265	
MM-554.13	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 13 FUROS	281	
MM-554.14	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 14 FUROS	297	
MM-554.15	PLACA PROXIMAL DE TÍBIA DIREITA BLOQUEADA 15 FUROS	313	
MM-555.04	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 04 FUROS	111	
MM-555.05	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 05 FUROS	127	
MM-555.06	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 06 FUROS	143	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-555.07	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 07 FUROS	159	
MM-555.08	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 08 FUROS	175	
MM-555.09	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 09 FUROS	191	
MM-555.10	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 10 FUROS	207	
MM-555.11	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 11 FUROS	223	
MM-555.12	PLACA MEDPLATE FÍBULA BLOQUEADA 12 FUROS	239	
MM-556.04	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	131	
MM-556.05	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	147	
MM-556.06	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	163	
MM-556.07	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	179	
MM-556.08	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	195	
MM-556.09	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	211	
MM-556.10	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	227	
MM-556.11	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 11 FUROS	243	
MM-556.12	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	259	
MM-556.13	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 13 FUROS	275	
MM-556.14	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 14 FUROS	291	
MM-556.15	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 15 FUROS	307	
MM-557.04	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	131	
MM-557.05	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	147	
MM-557.06	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	163	
MM-557.07	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	179	
MM-557.08	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	195	
MM-557.09	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	211	
MM-557.10	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	227	
MM-557.11	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUROS	243	
MM-557.12	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUROS	259	
MM-557.13	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 13 FUROS	275	
MM-557.14	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 14 FUROS	291	
MM-557.15	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 15 FUROS	307	

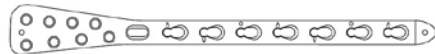
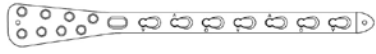


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-558.04	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	63	
MM-558.06	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	93	
MM-558.08	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	123	
MM-558.10	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	153	
MM-558.12	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	183	
MM-558.13	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 13 FUROS	198	
MM-558.14	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 14 FUROS	212	
MM-558.15	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA DIREITA 15 FUROS	227	
MM-559.04	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	63	
MM-559.06	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	93	
MM-559.08	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	123	
MM-559.10	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	153	
MM-559.12	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUROS	183	
MM-559.13	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 13 FUROS	198	
MM-559.14	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 14 FUROS	212	
MM-559.15	PLACA MEDPLATE DISTAL DE TÍBIA ANTEROLATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 15 FUROS	227	
MM-560.02	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 02 FUROS	72	
MM-560.03	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 03 FUROS	86	
MM-560.04	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 04 FUROS	101	
MM-560.05	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 05 FUROS	115	
MM-560.06	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 06 FUROS	130	
MM-560.07	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 07 FUROS	144	
MM-560.08	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 08 FUROS	159	
MM-560.09	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 09 FUROS	173	
MM-560.10	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 10 FUROS	188	
MM-560.11	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 11 FUROS	202	
MM-560.12	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 12 FUROS	217	
MM-560.13	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 13 FUROS	231	
MM-560.14	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 14 FUROS	246	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-560.15	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 15 FUROS	260	
MM-560.16	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 16 FUROS	274	
MM-560.17	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 17 FUROS	288	
MM-560.18	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 18 FUROS	302	
MM-560.19	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 19 FUROS	316	
MM-560.20	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE ÚMERO BLOQUEADA 20 FUROS	330	
MM-561.04	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	131	
MM-561.05	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	147	
MM-561.06	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	163	
MM-561.07	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	179	
MM-561.08	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	195	
MM-561.09	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	211	
MM-561.10	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	227	
MM-561.11	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUROS	243	
MM-561.12	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUROS	259	
MM-561.13	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 13 FUROS	275	
MM-561.14	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 14 FUROS	291	
MM-561.15	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA ESQUERDA 15 FUROS	307	
MM-562.04	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	131	
MM-562.05	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	147	
MM-562.06	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	163	
MM-562.07	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	179	
MM-562.08	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	195	
MM-562.09	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	211	
MM-562.10	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	227	
MM-562.11	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 11 FUROS	243	
MM-562.12	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	259	
MM-562.13	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 13 FUROS	275	
MM-562.14	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 14 FUROS	291	
MM-562.15	PLACA MEDPLATE PROXIMAL DE TÍBIA BLOQUEADA DIREITA 15 FUROS	307	

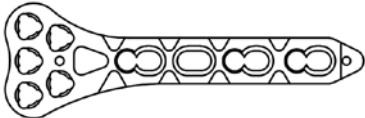


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-563.04	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 04 FUROS	71	
MM-563.05	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 05 FUROS	84	
MM-563.06	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 06 FUROS	97	
MM-563.07	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 07 FUROS	110	
MM-563.08	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 08 FUROS	123	
MM-563.09	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 09 FUROS	136	
MM-563.10	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 10 FUROS	149	
MM-563.11	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 11 FUROS	162	
MM-563.12	PLACA MEDPLATE T 3F BLOQUEADA 12 FUROS	175	
MM-564.04	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 04 FUROS	71	
MM-564.05	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 05 FUROS	84	
MM-564.06	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 06 FUROS	97	
MM-564.07	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 07 FUROS	110	
MM-564.08	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 08 FUROS	123	
MM-564.09	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 09 FUROS	136	
MM-564.10	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 10 FUROS	149	
MM-564.11	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 11 FUROS	162	
MM-564.12	PLACA MEDPLATE T 4F BLOQUEADA 12 FUROS	175	
MM-565.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 01 FURO	62,5	
MM-565.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUROS	73,5	
MM-565.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUROS	84,5	
MM-565.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	95,5	
MM-565.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	106,5	
MM-565.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	117,5	
MM-565.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	128,5	
MM-565.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	139,5	
MM-565.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	150,5	
MM-565.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	161,5	
MM-565.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUROS	172,5	

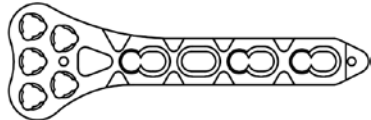


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-565.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUROS	183,5	
MM-566.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 01 FURO	62,5	
MM-566.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 02 FUROS	73,5	
MM-566.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 03 FUROS	84,5	
MM-566.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	95,5	
MM-566.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	106,5	
MM-566.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	117,5	
MM-566.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	128,5	
MM-566.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	139,5	
MM-566.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	150,5	
MM-566.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	161,5	
MM-566.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 11 FUROS	172,5	
MM-566.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	183,5	
MM-567.02	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 02 FUROS	63	
MM-567.03	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 03 FUROS	73	
MM-567.04	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 04 FUROS	83	
MM-567.05	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 05 FUROS	93	
MM-567.06	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 06 FUROS	103	
MM-567.07	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 07 FUROS	113	
MM-567.08	PLACA MEDPLATE DISTAL ULNA BLOQUEADA 08 FUROS	123	
MM-568.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 01 FUROS	51,5	
MM-568.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 02 FUROS	62,5	
MM-568.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 03 FUROS	73,5	
MM-568.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	84,5	
MM-568.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	95,5	
MM-568.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	106,5	
MM-568.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	117,5	
MM-568.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	128,5	
MM-568.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	139,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-568.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	150,5	
MM-568.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 11 FUROS	161,5	
MM-568.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 12 FUROS	172,5	
MM-569.01	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 01 FURO	51,5	
MM-569.02	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUIROS	62,5	
MM-569.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUIROS	73,5	
MM-569.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUIROS	84,5	
MM-569.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUIROS	95,5	
MM-569.06	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUIROS	106,5	
MM-569.07	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUIROS	117,5	
MM-569.08	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUIROS	128,5	
MM-569.09	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUIROS	139,5	
MM-569.10	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUIROS	150,5	
MM-569.11	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUIROS	161,5	
MM-569.12	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL MINI VOLAR ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUIROS	172,5	
MM-570.01	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 01 FURO	48	
MM-570.02	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 02 FUIROS	58	
MM-570.03	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 03 FUIROS	68	
MM-570.04	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 04 FUIROS	78	
MM-570.05	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 05 FUIROS	88	
MM-570.06	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 06 FUIROS	98	
MM-570.07	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 07 FUIROS	108	
MM-570.08	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 08 FUIROS	118	
MM-570.09	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 09 FUIROS	128	
MM-570.10	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 10 FUIROS	138	
MM-570.11	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA DIREITA 11 FUIROS	148	
MM-571.02	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUIROS	58	

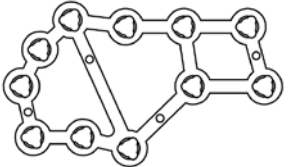
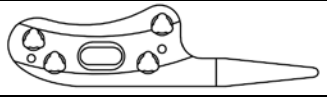
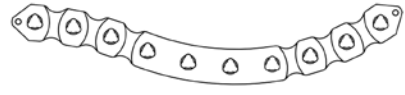
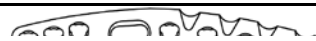


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-571.03	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUIROS	68	
MM-571.04	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUIROS	78	
MM-571.05	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUIROS	88	
MM-571.06	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUIROS	98	
MM-571.07	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUIROS	108	
MM-571.08	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUIROS	118	
MM-571.09	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUIROS	128	
MM-571.10	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUIROS	138	
MM-571.11	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 11 FUIROS	148	
MM-571.12	PLACA MEDPLATE ULNA VOLAR BLOQUEADA ESQUERDA 12 FUIROS	158	
MM-572.01	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA DIREITA 01 FUIRO	72,4	
MM-572.02	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA DIREITA 02 FUIROS	86,2	
MM-572.03	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA DIREITA 03 FUIROS	100,0	
MM-573.01	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA ESQUERDA 01 FUIRO	72,4	
MM-573.02	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUIROS	86,2	
MM-573.03	PLACA MEDPLATE DORSAL "Y" BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUIROS	100,0	
MM-574.02	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO BLOQUEADA DIREITA 02 FUIROS	57,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-575.02	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUROS	57,5	
MM-576.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	66,5	
MM-576.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	88	
MM-576.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	97	
MM-577.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	66,5	
MM-577.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	88	
MM-577.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA COM GANCHO BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	97	
MM-578.04	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	53,3	
MM-578.05	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	64,9	
MM-578.06	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	76,3	
MM-578.07	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	87,4	
MM-578.08	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	99,1	
MM-578.09	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	109	
MM-578.10	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	120,5	
MM-579.04	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	53,3	
MM-579.05	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	64,9	
MM-579.06	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	76,3	
MM-579.07	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	87,4	
MM-579.08	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	99,1	
MM-579.09	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	109	
MM-579.10	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	120,5	
MM-580.01	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 01 FURO	47,5	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-580.02	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 02 FUROS	56,5	
MM-580.03	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 03 FUROS	65,5	
MM-580.04	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	74,5	
MM-580.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	83,5	
MM-580.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	92,5	
MM-580.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	101,5	
MM-580.08	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	110,5	
MM-580.09	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	119,5	
MM-580.10	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	128,5	
MM-581.01	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 01 FURO	47,5	
MM-581.02	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUROS	56,5	
MM-581.03	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUROS	65,5	
MM-581.04	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	74,5	
MM-581.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	83,5	
MM-581.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	92,5	
MM-581.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	101,5	
MM-581.08	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	110,5	
MM-581.09	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	119,5	
MM-581.10	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA ANGULADA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	128,5	
			
MM-582.04	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	53,3	
MM-582.05	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	64,9	
MM-582.06	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	76,3	
MM-582.07	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	87,4	
MM-582.08	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	99,1	
MM-582.09	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	109	
MM-582.10	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	120,5	
MM-583.04	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	53,3	
MM-583.05	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	64,9	
MM-583.06	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	76,3	

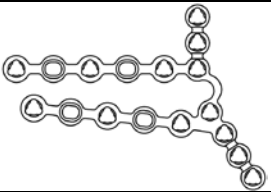
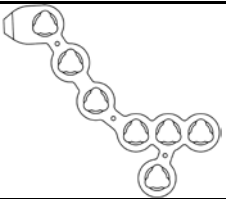
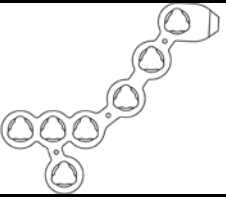
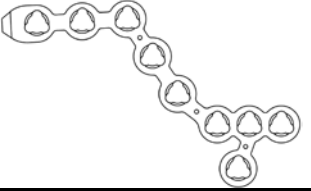


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-583.07	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	87,4	
MM-583.08	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	99,1	
MM-583.09	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	109	
MM-583.10	PLACA MEDPLATE S CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	120,5	
MM-584.01	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 01 FURO	58,1	
MM-584.02	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 02 FUROS	75,4	
MM-584.03	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 03 FUROS	92,6	
MM-584.04	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 04 FUROS	109,4	
MM-584.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	126	
MM-584.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 06 FUROS	142,1	
MM-584.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 07 FUROS	157,9	
MM-584.08	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 08 FUROS	173,1	
MM-584.09	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 09 FUROS	187,9	
MM-584.10	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA DIREITA 10 FUROS	202,1	
MM-585.01	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 01 FURO	58,1	
MM-585.02	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 02 FUROS	75,4	
MM-585.03	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUROS	92,6	
MM-585.04	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 04 FUROS	109,4	
MM-585.05	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	126	
MM-585.06	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 06 FUROS	142,1	
MM-585.07	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS	157,9	
MM-585.08	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 08 FUROS	173,1	
MM-585.09	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS	187,9	
MM-585.10	PLACA MEDPLATE CLAVÍCULA BLOQUEADA ESQUERDA 10 FUROS	202,1	
MM-586.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	54	
MM-586.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	64	

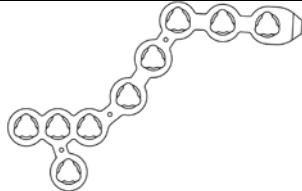


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-586.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-587.03	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	54	
MM-587.04	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	64	
MM-587.05	PLACA MEDPLATE RÁDIO DISTAL DORSAL ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-588.03	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO ANTERO LATERAL BLOQUEADA DIREITA 03 FUROS	40	
MM-589.03	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO ANTERO LATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 03 FUROS	40	
MM-590.05	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO ANTERO LATERAL MÉDIA BLOQUEADA DIREITA 05 FUROS	56	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-591.05	PLACA MEDPLATE CALCÂNEO ANTERO LATERAL MÉDIA BLOQUEADA ESQUERDA 05 FUROS	56	
MM-592.01	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	68	
MM-592.02	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	80	
MM-592.03	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	92	
MM-592.04	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	104	
MM-592.05	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	116	
MM-592.06	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	128	
MM-592.07	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	140	
MM-592.08	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	152	
MM-592.09	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	164	
MM-592.10	PLACA PARA FÍBULA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	176	
MM-593.01	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	68	
MM-593.02	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	80	
MM-593.03	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	92	
MM-593.04	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	104	
MM-593.05	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	116	
MM-593.06	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	128	
MM-593.07	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	140	
MM-593.08	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	152	
MM-593.09	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	164	
MM-593.10	PLACA PARA FÍBULA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	176	
MM-594.01	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-594.02	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	69	
MM-594.03	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	77	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-594.04	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	85	
MM-594.05	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	93	
MM-594.06	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	101	
MM-594.07	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	109	
MM-594.08	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	117	
MM-594.09	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	125	
MM-594.10	PLACA DISTAL ULNA DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	133	
MM-595.01	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	61	
MM-595.02	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	69	
MM-595.03	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	77	
MM-595.04	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	85	
MM-595.05	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	93	
MM-595.06	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	101	
MM-595.07	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	109	
MM-595.08	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	117	
MM-595.09	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	125	
MM-595.10	PLACA DISTAL ULNA ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	133	
MM-596.01	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-596.02	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 02 FUROS	50	
MM-596.03	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-596.04	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-596.05	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-596.06	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-596.07	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-596.08	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 08 FUROS	98	
MM-596.09	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-596.10	PLACA DISTAL ULNA GANCHO DIREITA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-597.01	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 01 FURO	42	
MM-597.02	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 02 FUROS	50	

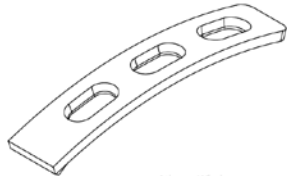
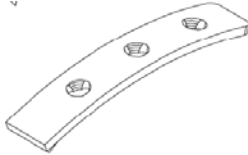
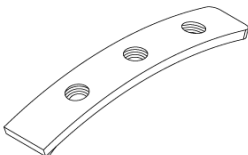


Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-597.03	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 03 FUROS	58	
MM-597.04	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 04 FUROS	66	
MM-597.05	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 05 FUROS	74	
MM-597.06	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 06 FUROS	82	
MM-597.07	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 07 FUROS	90	
MM-597.08	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 08 FUROS	98	
MM-597.09	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 09 FUROS	106	
MM-597.10	PLACA DISTAL ULNA GANCHO ESQUERDA BLOQUEADA 10 FUROS	114	
MM-598.01	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 01 FURO	68	
MM-598.02	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 02 FUROS	80	
MM-598.03	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 03 FUROS	92	
MM-598.04	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 04 FUROS	104	
MM-598.05	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 05 FUROS	116	
MM-598.06	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 06 FUROS	128	
MM-598.07	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 07 FUROS	140	
MM-598.08	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 08 FUROS	152	
MM-598.09	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 09 FUROS	164	
MM-598.10	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA DIREITA ANGULADA BLOQUEADA 10 FUROS	176	
MM-599.01	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 01 FURO	68	
MM-599.02	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 02 FUROS	80	
MM-599.03	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 03 FUROS	92	
MM-599.04	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 04 FUROS	104	
MM-599.05	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 05 FUROS	116	
MM-599.06	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 06 FUROS	128	
MM-599.07	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 07 FUROS	140	
MM-599.08	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 08 FUROS	152	
MM-599.09	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 09 FUROS	164	
MM-599.10	PLACA MEDPLATE PARA FÍBULA ESQUERDA ANGULADA BLOQUEADA 10 FUROS	176	



Anexo 1
Relação de Modelos Comerciais:
Sistema de placas bloqueadas MEDPLATE

MM-500.123.01	PLACA MEDPLATE PÉLVICO MOLA 01 FURO	26,2	
MM-500.123.02	PLACA MEDPLATE PÉLVICO MOLA 02 FUIROS	42,2	
MM-500.123.03	PLACA MEDPLATE PÉLVICO MOLA 03 FUIROS	58,2	
MM-500.123.04	PLACA MEDPLATE PÉLVICO MOLA 04 FUIROS	74,2	
MM-500.123.05	PLACA MEDPLATE PÉLVICO MOLA 05 FUIROS	90,2	
MM-500.124.01	PLACA MEDPLATE PÉLVICO ANGULADA MOLA 01 FURO	26,2	
MM-500.124.02	PLACA MEDPLATE PÉLVICO ANGULADA MOLA 02 FUIROS	42,2	
MM-500.124.03	PLACA MEDPLATE PÉLVICO ANGULADA MOLA 03 FUIROS	58,2	
MM-500.124.04	PLACA MEDPLATE PÉLVICO ANGULADA MOLA 04 FUIROS	74,2	
MM-500.124.05	PLACA MEDPLATE PÉLVICO ANGULADA MOLA 05 FUIROS	90,2	
MM-500.125.01	PLACA MEDPLATE PÉLVICO BLOQUEADA MOLA 01 FURO	26,2	
MM-500.125.02	PLACA MEDPLATE PÉLVICO BLOQUEADA MOLA 02 FUIROS	42,2	
MM-500.125.03	PLACA MEDPLATE PÉLVICO BLOQUEADA MOLA 03 FUIROS	58,2	
MM-500.125.04	PLACA MEDPLATE PÉLVICO BLOQUEADA MOLA 04 FUIROS	74,2	
MM-500.125.05	PLACA MEDPLATE PÉLVICO BLOQUEADA MOLA 05 FUIROS	90,2	



Anexo 2

Compatibilidade dimensional Placas/Parafusos: Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate

As placas do Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate devem ser implantadas respeitando a correlação dimensional entre as placas e parafusos destacados, em vermelho, a seguir:

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS
MM-500.1.YY		MM-500.98.YY		MM-551.YY	
MM-500.2.YY	MM-295.XX	MM-500.99.YY	MM-295.XX	MM-552.YY	MM-295.XX
MM-500.3.YY		MM-500.100.YY		MM-531.YY	
MM-500.4.YY		MM-500.101.YY		MM-532.YY	
MM-500.5.YY	MM-295.1.XX	MM-500.102.YY	MM-295.1.XX	MM-533.YY	MM-295.1.XX
MM-500.6.YY		MM-500.103.YY		MM-534.YY	
MM-500.7.YY		MM-500.104.YY		MM-535.YY	
MM-500.8.YY	MM-295.2.XX	MM-500.105.YY	MM-295.2.XX	MM-567.YY	MM-295.2.XX
MM-500.9.YY	MM-246.XX	MM-500.106.YY	MM-246.XX	MM-568.YY	MM-246.XX
MM-500.10.YY		MM-500.107.YY		MM-569.YY	
MM-500.11.YY	MM-296.XX	MM-500.108.YY	MM-296.XX	MM-570.YY	MM-296.XX
MM-500.12.YY		MM-500.109.YY		MM-571.YY	
MM-500.13.YY		MM-500.110.YY		MM-572.YY	
MM-500.14.YY		MM-500.111.YY		MM-573.YY	
MM-500.15.YY	MM-297.XX	MM-500.112.YY	MM-297.XX	MM-574.YY	MM-297.XX
MM-500.16.YY		MM-500.113.YY		MM-575.YY	
MM-500.17.YY		MM-500.114.YY		MM-580.YY	
MM-500.18.YY	MM-298.XX	MM-500.115.YY	MM-298.XX	MM-581.YY	MM-298.XX
MM-500.19.YY		MM-500.116.YY		MM-586.YY	
MM-500.20.YY		MM-500.117.YY		MM-587.YY	
MM-500.21.YY		MM-500.118.YY		MM-588.YY	
MM-500.22.YY	MM-253.XX	MM-500.119.YY	MM-253.XX	MM-589.YY	MM-253.XX
MM-500.123.YY		MM-500.120.YY		MM-590.YY	
MM-500.125.YY		MM-500.121.YY		MM-591.YY	
MM-500.124.YY	MM-254.XX	MM-500.122.YY	MM-254.XX	MM-594.YY	MM-254.XX
MM-500.26.YY		MM-542.YY		MM-595.YY	
MM-500.93.YY		MM-543.YY		MM-596.YY	
MM-500.94.YY	MM-255.XX	MM-547.YY	MM-255.XX	MM-597.YY	MM-255.XX
MM-500.95.YY		MM-548.YY		MM-598.YY	
MM-500.96.YY		MM-549.YY		MM-599.YY	
MM-500.97.YY	MM-256.XX	MM-550.YY	MM-256.XX		MM-256.XX



Anexo 2

Compatibilidade dimensional Placas/Parafusos: Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS
MM-500.50.YY MM-500.51.YY MM-500.52.YY MM-500.53.YY MM-500.54.YY MM-500.55.YY MM-500.63.YY MM-500.65.YY MM-500.71.YY MM-500.72.YY MM-500.76.YY MM-500.77.YY MM-500.78.YY MM-500.79.YY MM-500.80.YY MM-500.81.YY MM-500.82.YY MM-500.83.YY MM-500.84.YY MM-500.90.YY MM-500.91.YY MM-528.YY MM-529.YY MM-544.YY MM-545.YY MM-553.YY MM-554.YY MM-556.YY MM-557.YY MM-558.YY MM-559.YY MM-561.YY MM-562.YY MM-500.23.YY MM-500.24.YY MM-500.25.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX	MM-500.46.YY MM-500.47.YY MM-500.73.YY MM-500.85.YY MM-500.86.YY MM-500.87.YY MM-500.88.YY MM-500.89.YY MM-500.92.YY MM-522.YY MM-523.YY MM-524.YY MM-525.YY MM-526.YY MM-527.YY MM-530.YY MM-536.YY MM-537.YY MM-538.YY MM-539.YY MM-540.YY MM-541.YY MM-546.YY MM-555.YY MM-560.YY MM-563.YY MM-564.YY MM-576.YY MM-577.YY MM-578.YY MM-579.YY MM-584.YY MM-585.YY MM-592.YY MM-593.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX	MM-500.58.YY MM-500.61.YY MM-500.62.YY MM-500.64.YY MM-500.67.YY MM-500.68.YY MM-500.69.YY MM-500.70.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX



Anexo 2

Compatibilidade dimensional Placas/Parafusos: Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS
MM-500.56.YY MM-500.57.YY MM-500.74.YY MM-500.75.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX	MM-500.66.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX	MM-500.59.YY MM-500.60.YY	MM-295.XX MM-257.XX MM-295.1.XX MM-245.XX MM-295.2.XX MM-246.XX MM-296.XX MM-247.XX MM-297.XX MM-248.XX MM-298.XX MM-249.XX MM-253.XX MM-250.XX MM-254.XX MM-251.XX MM-255.XX MM-252.XX MM-256.XX



Anexo 2

Compatibilidade dimensional Placas/Parafusos: Sistema de Placas Bloqueadas MedPlate

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	
MM-565.YY MM-566.YY	MM-295.XX	MM-257.XX
	MM-295.1.XX	MM-245.XX
	MM-295.2.XX	MM-246.XX
	MM-296.XX	MM-247.XX
	MM-297.XX	MM-248.XX
	MM-298.XX	MM-249.XX
	MM-253.XX	MM-250.XX
	MM-254.XX	MM-251.XX
	MM-255.XX	MM-252.XX
	MM-256.XX	

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	
MM-582.YY MM-583.YY	MM-295.XX	MM-257.XX
	MM-295.1.XX	MM-245.XX
	MM-295.2.XX	MM-246.XX
	MM-296.XX	MM-247.XX
	MM-297.XX	MM-248.XX
	MM-298.XX	MM-249.XX
	MM-253.XX	MM-250.XX
	MM-254.XX	MM-251.XX
	MM-255.XX	MM-252.XX
	MM-256.XX	

PLACAS	PARAFUSOS COMPATÍVEIS	
MM-500.48.YY MM-500.49.YY	MM-295.XX	MM-257.XX
	MM-295.1.XX	MM-245.XX
	MM-295.2.XX	MM-246.XX
	MM-296.XX	MM-247.XX
	MM-297.XX	MM-248.XX
	MM-298.XX	MM-249.XX
	MM-253.XX	MM-250.XX
	MM-254.XX	MM-251.XX
	MM-255.XX	MM-252.XX
	MM-256.XX	